

Einsätze für Babyflaschensauger E 458 und E 364



⚠ Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung des Reinigungs-/Desinfektionsautomaten. Bereiten Sie ausschließlich Sauger auf, die von ihrem Hersteller als maschinell wiederaufbereitbar deklariert und freigegeben sind und beachten Sie dessen Hinweise. Sauger aus Latexmaterialien überstehen nur eine begrenzte Zahl von Wiederaufbereitungen und sind dann durch neue Sauger zu ersetzen. Das verwendete Aufbereitungsprogramm mit bevorzugt thermischer Desinfektion (z.B. A₀ 600), vorzugsweise mit Vario-Verfahren, muss ggf. auf die Materialqualitäten abgestimmt sein. Die Reinigungstemperatur kann zur Ergebnisverbesserung auch auf 65°C eingestellt werden, weil die Milchproteine erst bei höheren Temperaturen denaturieren. Beachten Sie die Empfehlung des Kundendienstes.

Einsätze:


E 458 für Schraubkappensauger, mit 36 Fächern 29 x 29 mm, H 63 mm, B 215 mm, T 445 mm
E 364 für Weithalssauger, mit 36 Fächern 41 x 41 mm, H 77 mm, B 215 mm, T 445 mm

Nachkaufbares Zubehör:

E 135 mit Deckel, für 19 Babyflaschen mit 250 ml Volumen
E 135/1 mit Deckel, für 19 Babyflaschen mit 110 ml Volumen
E 135/2 mit Deckel, für 19 Babyflaschen mit 90 ml Volumen
E 135/3 mit Deckel, für 19 Babyflaschen mit 120 ml Volumen
Siebschale E 142 für Flaschenverschlüsse
Deckel A 16 zur Abdeckung der Siebschale E 142


Anwendungsgebiet:

Mit den Einsätzen E 458 und E 364 können 36 Sauger für Babyflaschen gereinigt und desinfiziert werden. Sie sind in Ober- und Unterkörben sowie in leeren Wagen, z. B. E 935-3, E 735-3 oder E 555, einsetzbar.

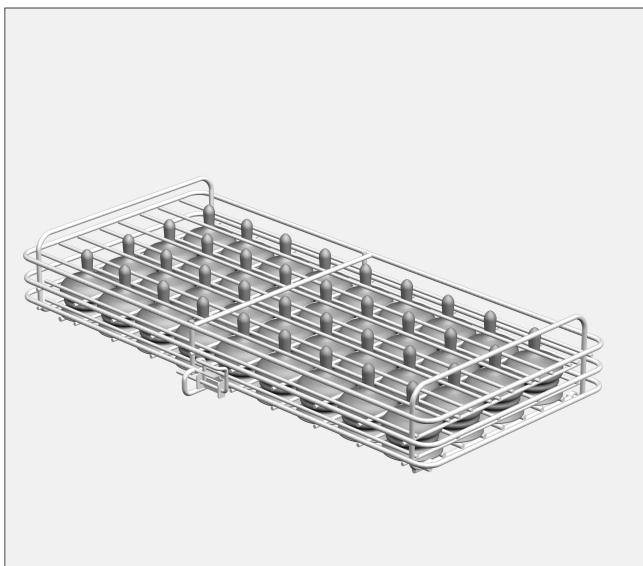

E 364:

- Den Verschluss des Einsatzes öffnen und den Einsatz aufklappen.
- Benutzte Weithalssauger mit der Öffnung nach oben in den Einsatz stecken.
- Den Einsatz zuklappen und verschließen.

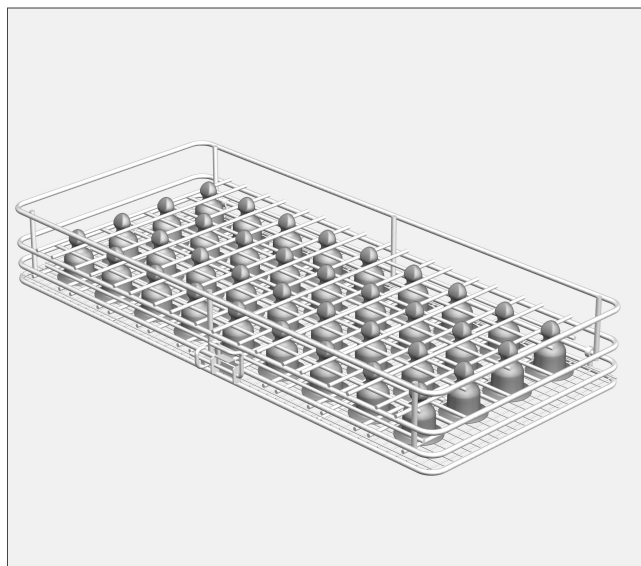


E 458:

- Den Verschluss des Einsatzes öffnen und den Einsatz aufklappen.
- Benutzte Schraubkappensauger mit der Öffnung nach oben in den Einsatz stecken.
- Den Einsatz zuklappen und verschließen.



E 142 mit A 16:

- Verschlusskappen und Schraubverschlüsse mit dem Gewinde nach unten in die Siebschale legen.
- Die leichten Kunststoffteile mit den Abdeckungen in der Siebschale sichern.

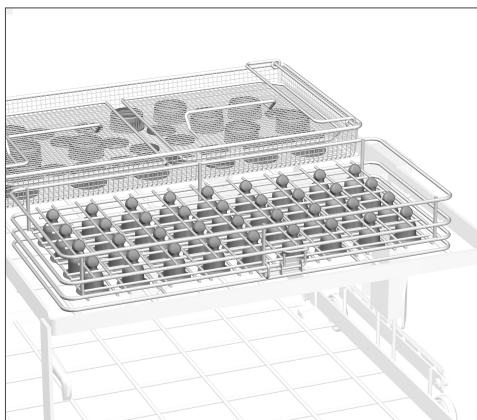

Soweit keine anschließende Sterilisation erfolgt, ist zur Vermeidung von Wasserkeimwachstum während der Lagerung eine vollständige Trocknung erforderlich. Dazu muss unbedingt eine ausreichende Trocknungszeit gewählt werden.

- Die Einsätze auf eine Ebene des Wagens stellen, die Öffnungen der Sauger zeigen nach unten.
- Die Siebschale E 142 mit den gesicherten Kunststoffteilen ebenfalls in den Wagen stellen.

KS Medizintechnik
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921
HIER GÜNSTIG KAUFEN
www.ksmedizintechnik.de