



x-ray.

**MULTILINE NEXT ACX+.
MOBILE OPERATIONS- UND VERSORGUNGS-
LIEGE FÜR AMBULANTE PATIENTEN IN
DER CHIRURGIE.**

**Neu: mit
durchleucht-
barem
Beinteil!**



KS Medizintechnik

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN 

www.ksmedizintechnik.de



GREINER



MULTILINE NEXT ACX+. MOBILE OPERATIONS- UND VERSORGUNGLIEGE MIT DURCHLEUCHTBAREM BEINTEIL.

Die MULTILINE NEXT ACX+ entspricht vollständig den Anforderungen, die von ambulant chirurgisch tätigen Einrichtungen heute an mobile Liegen im und um den OP gestellt werden. Für Eingriffe an Kopf, Gesicht und oberen Gliedmaßen bietet die ACX+ mit kurzem Rückenteil und dem vielseitigen Kopfstützenprogramm genau die Flexibilität, die interdisziplinäres Arbeiten braucht. Und mit dem neuen durchleuchtbaren Beinteil erweitert sich das Einsatzspektrum auf vielfältige Weise.

Röntgenaufnahmen von Unterschenkel, Sprunggelenk und Fuß mit dem C-Bogen, auch intraoperativ, gelingen nicht nur schnell und befundungsgerecht, sie erfolgen auch ergonomisch und komfortabel für die Patienten. Die MULTILINE NEXT ACX+ ist damit für das OP-Umfeld eine interessante und wirtschaftliche Alternative.

MULTILINE NEXT ACX+ – Mobile OP-Liege für die ambulante Chirurgie

- OPs in MKG-, Oral-, plastischer und dermatologischer Chirurgie, HNO, Ophthalmologie, Orthopädie, Hand-Chirurgie (Arm-/Hand-Chirurgie-Tisch als Option) u.v.m.
- Röntgen und Diagnostik der unteren und oberen Gliedmaßen
- OP-Vorbereitung, Ruhe- und post-operativer Aufwachraum in der Chirurgie, Untersuchung, Behandlung, Mobilisation, Transport
- Elektromotorische Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil sowie Höhenhub bis 90 cm
- Wechselakku, Rollen und Fahrgestell für mobilen Betrieb
- Not-Fußschalter für Trendelenburgposition
- Zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Produkt – Made in Germany



Durchleuchtbares Beinteil für die unteren Gliedmaßen, Abb. mit Schutzfolie (opt.)



Röntgenaufnahmen als Beispiele von Fuß und Sprunggelenk

DIE LIEGE FÜR FLEXIBILITÄT UND MOBILITÄT IN DER AMBULANTEN CHIRURGIE.

Ambulant durchgeführte Operationen sind mehr denn je das Gebot der Stunde. Natürlich für die Kliniken – maßgeblich profitiert aber die rapide wachsende Zahl ambulanter OP-Zentren, MVZs und Praxiskliniken von dieser Entwicklung. Der Nutzen verteilt sich zu gleichen Teilen auf die Patienten, die in immer weniger Fällen stationär aufgenommen werden müssen, auf die Einrichtungen, deren Wirtschaftlichkeit sich dadurch nachhaltig verbessert und schließlich auf die Kostenträger, deren Budgets entlastet werden. Die Liegen der GREINER MULTILINE NEXT AC Serie tragen unmittelbar dazu bei, ambulante Operationen vielfältiger Disziplinen effizient und sicher durchführen zu können.

Mit der neuen MULTILINE NEXT ACX+ erweitert eine faszinierend einfache Lösung das Procedere, indem sie die Radiologie in den Workflow integriert. Zusätzlich zu den Qualitäten der erfolgreich eingesetzten OP- und Versorgungsliege AC+ besitzt die ACX+ ein durchleuchtbares Beinteil. Patienten verbleiben damit von der Aufnahme über die Diagnostik und die OP bis in die Aufwachzone auf der gleichen Liege – ohne Umlagern.



Sitzposition/Einstiegsposition

Zero Gravity/Relaxposition

Flachlage/Bettposition


Trendelenburgposition



Chirurgisch minimalinvasive Eingriffe an Haut und Gliedmaßen (z.B. Hand-Chirurgie) direkt an der Liege.




Kopfstütze Vollkalotte für Quick Assist

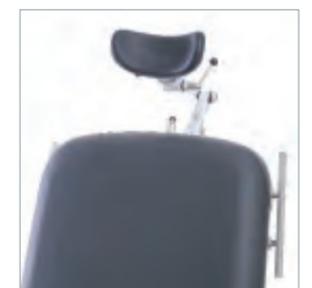

Kopfstütze Halbkalotte für Quick Assist



Wechsel mit Quick Assist Schnellkupplung

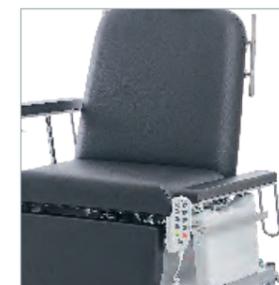

Armstützen vollständig versenkbar



Normschienen für klinisches Zubehör



Fußschalter für ergonomische Frei-Hand-OP

MULTILINE NEXT ACX+

Hygiene

Perfekter Zugang, sauberer Flächenabschluss, geprüfte Oberflächen, Minimum an Nähten

Sitz- und Liegekomfort

Komfortable, 60 cm breite Polsterauflage für Patienten von Größe und hohem Gewicht

Leitfähigkeit

Elektrisch leitender Bezug (schwarz)

Röntgenfähiges Beinteil

Beinteil durchleuchtbar, ergonomische Beinauflage von Zero Gravity (30 °) bis Flachlage, Schutzfolie (opt.)

Kopfstützen nach Wahl

Ergo, ohne/mit Vario-Doppelgelenk, Quick Assist Schnellkupplung, Wechsellpolster sowie Voll- und Halbkalotte für Quick Assist

Fixierung

Umlaufendes Normschienensystem aus Edelstahl an den Rücken- und Seitenteilen

Ergonomie

Komfortable Polsterauflagen sowie fixier- und versenkbare Armauflagen für direkten Zugang und einfache Umlagerung

Stabilität

Hohe Belastung bis 220 kg, sicheres Handling beim Patiententransport

Richtungweisend Ein Rad einstellbar für perfekte Mobilität beim Geradeauslauf

Mobilität 12,5-cm-Lenkrollen für komfortable Fahrwege, zentrales Bremssystem, leistungsstarker Akku

MULTILINE NEXT ACX+ – Ausstattung / Zubehör

- ♦ Ausführung mit kurzem Rückenteil und Kopfstütze Ergo mit Vario-Doppelgelenk, Normschiene aus Edelstahl oben, 4 Motoren für die Funktionseinstellung, Zentralarretierung, Hochleistungs-Akku, Fußschalter/Notschalter.

Zubehör

- ♦ Elektrisch leitende Bezüge EL11 (schwarz) oder nach aktueller Farblarte
- ♦ Kopfstützen und Wechsellpolster
- ♦ Normschienen aus Edelstahl
- ♦ Ersatzakku und Wandladestation
- ♦ Infusionsstange und schwenkbarer Halter
- ♦ Doppel-Fußschalter
- ♦ Arm-Hand-Chirurgie-Tisch (zur Anbringung an Normschienen für Rückenteil)

Maße und technische Daten

♦ Stuhlposition (Stellfläche)	160 x 78 cm
♦ Liegeposition (Stellfläche)	202 x 78 cm
♦ Gesamtbreite	78 cm
♦ Liegefläche (L x B)	193 x 60 cm (inkl. Kopfstütze)
♦ Stärke Liegefläche	9 cm
♦ Armlehne (L x B)	73 x 7 cm
♦ Einstiegshöhe	58 cm
♦ Höhenverstellung	32 cm (58 – 90 cm)
♦ Rollendurchmesser	12,5 cm (1 x richtungweisend)
♦ Rücken	- 5° bis 78°
♦ Sitzteil	0° bis 22°
♦ Beinteil	0° bis 30°
♦ Maximales Patientengewicht	220 kg
♦ Spannung	100-240 V/50-60 Hz
♦ Akku Leistung	24 V DC, 1 x 2,9 Ah, (bis zu 40 Hübe)
♦ Gewicht Liege	140 kg



GREINER GmbH
 Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany
 T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99
 info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de