

comfort.



MULTILINE NEXT BEISTELLTISCHE BT UND BT PLUS.

KS Medizintechnik
seit 1921

Karthäuser Straße 21
34587 Felsberg
www.ksmedizintechnik.de
info@ksmedizintechnik.de
Kostenlose Servicehotline
Tel.: 0800 - 10 10 871



GREINER

[Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->](#)

Beistelltische BT und BT plus:

- ◆ Funktionale, stabile und komfortable Beistelltische mit leichtgängiger Mobilität
- ◆ Stabiler Metallrahmen für hohe Sicherheit bei Belastung mit bis zu 30 kg
- ◆ Komfortable Höhenverstellung mit nur einer Hand – auch durch Patienten
- ◆ Bedienelement für beidseitige Neigung des Tablett um 20 oder 40° (BT plus)
- ◆ Abnehmbare Tablett mit Griffmulden, sicher fixiert
- ◆ Perfekte Hygiene durch einfach und sicher zu reinigende Oberflächen
- ◆ Platzsparende Lösung – Tische können ineinander geschoben werden



MULTILINE NEXT BEISTELLTISCHE BT UND BT PLUS.

Sanft rollen sie heran: die neuen GREINER Beistelltische BT und BT plus. Entwickelt und designt als hochwertige Patiententische zu den Therapieliegen MULTILINE NEXT DC und IT stellen sie den Patientenkomfort sichtbar in den Mittelpunkt. Die flexiblen Funktionstische, BT mit starrem und BT plus mit schwenkbarem Tablett, erfüllen jeden Wunsch, um Patienten die Therapiezeit bei Dialyse oder Chemotherapie, aber auch bei anderen Behandlungen, möglichst angenehm zu gestalten. Gebaut in einem einzigartigen Mix aus Stabilität und Leichtigkeit, höhenverstellbar mit nur einer Hand, sind sie geeignet für die Aufnahme aller Dinge, die rund um das Patientenwohl zum Einsatz kommen.

Beistelltisch BT plus
 Stufenlos höhenverstellbar mit einer Hand, schwenkbares Tablett, Zubehör Haken und Halter für Zeitschriften oder Patientenakte.



Beistelltisch BT
 Stufenlos höhenverstellbar mit einer Hand, starres Tablett, Zubehör Haken und duales multifunktionales Staufach.



Ideale Kombination mit MULTILINE NEXT DC und IT (hier Modell IT)

Funktionalität, Ergonomie, Stabilität und Hygiene sind bei den neuen Beistelltischen so durchdacht und hochwertig umgesetzt, dass sie höchsten Anforderungen von Patienten und Pflegepersonal gerecht werden. Der stabile Rahmen „made by GREINER“ und die leichtgängigen Laufrollen machen die Tische einerseits sehr beweglich, andererseits stehen sie für eine sichere Belastung von bis zu 30 Kilogramm. Leistungsfähige Gasdruckfedern erlauben den sanften Höhenhub des Tablett mit einer Hand – sicher auch im Notfall bei Trendelenburglagerung. Beim BT plus lässt sich das Tablett beidseitig mit leichtem Tastendruck aus der Waagrechten neigen, ergonomisch für Pfleger und Patient. Die Tablett sind abnehmbar mit Griffmulden, maßgerecht geformt für Speisetablett oder Patientenartikel sowie beim Pflegeelement für klinisches Zubehör und Desinfektionsmittel. Alle Oberflächen sind widerstandsfähig und besonders geeignet für zeitsparende Reinigung und Desinfektion. Diverse Zubehörelemente erweitern die Funktionalität um praktische Lösungen speziell für Patienten.




Höhenverstellung mit doppelter Führung



Ablage schwenkbar (BT plus)



Design und Qualität made by GREINER

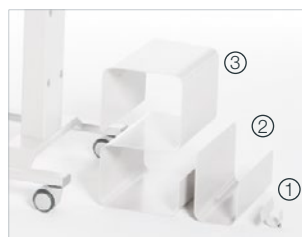

Multifunktionales Zubehör s. Tab.

Maße, technische Daten und Zubehör

◆ Beistelltische (L x B)	97 cm x 46 cm
◆ Ablagefläche (L x B)	56 cm x 39 cm
◆ Seitliche Ablage (L x B)	37 cm x 21 cm
◆ Höhenverstellung stufenlos	25 cm (79 – 104 cm)
◆ Rollendurchmesser	50 mm
◆ Neigungswinkel Ablage (BT plus)	20° / 40° beidseitig
◆ Maximale Belastung	30 kg
◆ Gewicht	ca. 22,5 kg
◆ Farbe	RAL 7047

Zubehör

◆ Haken (1)	Tasche, Beutel etc.
◆ Zeitschriftenhalter (2)	Literatur, Patientenakte
◆ Duales multifunktionales Staufach (3)	Schuhe, Tücher, Bücher