

infusion.



MULTILINE NEXT IT. LIEGE FÜR INFUSIONS- UND TRANSFUSIONSTHERAPIE.

KS Medizintechnik
seit 1921

Karthäuser Straße 21
34587 Felsberg
www.ksmedizintechnik.de
info@ksmedizintechnik.de
Kostenlose Servicehotline
Tel.: 0800 - 10 10 871



GREINER

[Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->](#)



infusion.

GREINER MEDBEST – MEDIZINTECHNIK MADE IN GERMANY.

GREINER stellt sich der Herausforderung, aus Wünschen von Patienten und Pflegepersonal innovative Lösungen zu entwickeln, die klinischen und wirtschaftlichen Anforderungen gleichermaßen gerecht werden. Made by GREINER heißt Made in Germany. Seit den 1970er Jahren bietet GREINER medbest Produkte für den medizinischen Bereich. Entwicklung und Produktion der GREINER Liegen bis hin zum Serviceangebot orientieren sich konsequent am Premiumanspruch. Dabei stützen wir uns auf Innovationsgeist, umgesetzt in vollautomatisierten Prozessen und qualifizierter Handarbeit. Hoher Anspruch in Design, Material, Technik und Ergonomie, kombiniert mit kundenorientierter Flexibilität, macht GREINER zum Partner qualitätsbewusster Kunden auf Spitzenniveau.

KOMPAKTE THERAPIELIEGE FÜR INFUSION UND TRANSFUSION.

Chemotherapie in der onkologischen Ambulanz ist ein großes Thema unserer Tage. Die Behandlung erfolgt vielfach im Sitzen, erfordert daher von einer Liege auch in dieser Position maximal hohen Patientenkomfort. Aufgrund häufig beengter Raumverhältnisse sind Liegen gefragt, die ihre Qualitäten auf engstem Raum ausspielen. Polsterung und Armstützen sind für das Befinden der Patienten ganz entscheidend. Zudem spielt der Einstieg der Patienten in die Sitzposition, abhängig von Alter und Gesundheitszustand, eine wichtige Rolle für die Akzeptanz bei Patienten und Pflegepersonal. In der Summe hohe Anforderungen, denen die neue MULTILINE NEXT IT mit ihrem Einstieg wie auf einen Stuhl perfekt entgegen kommt.



MULTILINE NEXT IT.

Diese kompakte Liege erfüllt die spezifischen Anforderungen von onkologischen Tageskliniken, der Infusions- und Transfusionsmedizin. Platzsparendes Design verbindet sie mit dem Komfort und der Sicherheit vollständig ausgestatteter Modelle. Patienten und Pflege team müssen auf keine Annehmlichkeiten und Leistungsmerkmale verzichten, vielmehr bringt die Liege die Patienten rasch in eine möglichst angenehme Position für die Therapie. Mit 60-cm-Sitzbreite und der senkrechten Anwinkelung des Beinteils kann sie wie ein Stuhl eingesetzt werden. Die bequeme, extra weiche Polsterung, patienten- und therapiegerechte Armstützen sowie das vielseitige Ausstattungsangebot machen die MULTILINE NEXT IT zur Liege der neusten Generation.

GREINER in der Onkologie:

- ◆ Vollständig neues Konzept in Design, Technologie und Leistungsmerkmalen, leichtgängige Mobilität auf Wunsch mit Zentralarretierung
- ◆ Ausstattung mit 3 Motoren für die stufenlose Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil bis zur Wunschposition und im Notfall Trendelenburglagerung
- ◆ Komfortable Polsterung in vielen Farben, Sitz- und Liegekomfort auf hohem Niveau, perfekte Hygiene mit einem Minimum an Nähten
- ◆ Einzigartige Konstruktion mit 90° Neigung des Beinteils – perfekt für Ein- und Ausstieg wie auf einen Stuhl, minimal im Platzbedarf
- ◆ Vielseitige Design- und Ausstattungsvarianten zur Anpassung an jedes Praxiskonzept
- ◆ Zuverlässige und von unabhängiger Stelle zertifizierte Produktsicherheit



MULTILINE NEXT IT. ONKOLOGIE-THERAPIELIEGE.

Diese neu entwickelte Therapieliege von GREINER verbindet die Leistungsfähigkeit hoch technisch ausgestatteter Liegen in kompakter Form auf engem Raum. Konzipiert für die mitunter schwächsten und von hochgradigen Krankheitsbildern betroffenen Patienten wird sie zum Begleiter in schwerer Zeit. Einfacher Einstieg, leichtgängige Rollen, verständliche Funktionen, stufenlos motorisierte Bewegungsabläufe in die Wunschposition, angenehme Armstützen und freundliche Farben der komfortablen Polsterung geben der Liege ihr Gesicht. Patientenkomfort, Ergonomie und Effizienz stehen im Mittelpunkt, wenn sie Patienten bei der über Stunden andauernden Chemotherapie beste Behandlungsbedingungen bietet.



GREINER Handschalter mit intelligenter Bedienführung: Einfache, international verständliche Symbole, Tasten mit hilfreichen und notfallgerechten Grundeinstellungen für Sitz-, Relax-, Bett- und Trendelenburgposition. Sicherheit durch Magnetschlüssel-Sperre.

Komfort, Funktionalität und Ergonomie.

Stufenlos motorisch einstellbar, gleichermaßen intelligent wie einfach zu bedienen über die Wahl- und Steuertasten des GREINER Bedienelements: Die MULTILINE NEXT IT für Infusions- und Transfusions-therapie bietet hohen Sitz- und Liegekomfort in jeder Lage. Von der Sitz-, Relax- und Bettposition bis zur notfallgerechten Trendelenburglagerung verfährt die Liege mit 3 Motoren schnell und schonend per Tastendruck in jede gewünschte oder erforderliche Position. Der Ein- und Ausstieg wird durch das senkrecht angewinkelte Beinteil und die Einstiegshöhe von 54 cm sehr erleichtert.

Das GREINER Designkonzept macht es Pflegern wie Patienten leicht, die leistungsfähigen Motoren für Rücken-, Sitz-, und Beinteil effizient zu nutzen. Mobil, stabil und sicher.



Sitzposition



Relaxposition



Bettposition/Flachlage



Trendelenburg- und Schockposition



MULTILINE NEXT IT. NEUER KOMFORT FÜR INFUSION UND TRANSFUSION.

Bei GREINER können Sie Behandlungsliegen maßgerecht für Ihre Erfordernisse ausstatten. Bezug und Polster wählen Sie ganz individuell. Premium Bezugsstoff und Polsterung bietet extra weiche, strapazierfähige Oberflächen und unterstützt durch ein elastisch-dynamisches Federsystem im Sitzteil die physiologische Bewegungsfreiheit von Wirbelsäule, Becken und Hüfte. Mit der Folge von angenehmer Druckentlastung für die Patienten. Ebenso setzen die Armauflagen Maßstäbe für patientengerechte Positionierung.



Niedriger Einstieg von vorn und von der Seite




Einzigartige Armstützentechnik mit patientengerechter Positionierung



Nackenrolle als Standard




Hochklappbare Armlehnen

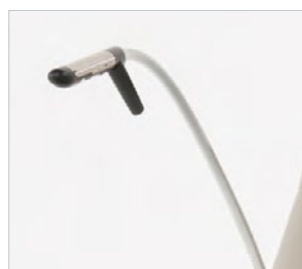

LED-Leselampe




Papierrollenhalter im Schiebebügel

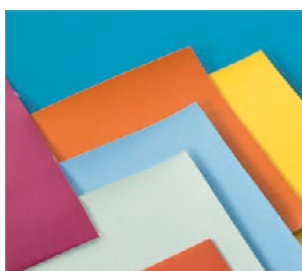

Wahl Bezugsstoff nach Farbkarte



Notfall-Fußschalter

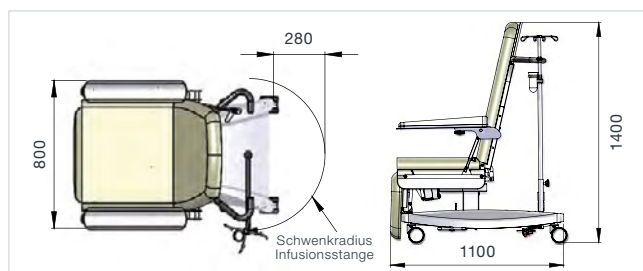

Perfekte Technik auf engstem Raum (Angaben in mm)

Flexibilität

Infusionsstangenhalter schwenkbar mit nur einer Hand nach links und rechts

Hygiene

Konstruktive Einhaltung schärfster Richtlinien, perfekter Zugang, sauberer Flächenabschluss, geprüfte Oberflächen, Minimum an Nähten

Farben und Zubehör

Umfassendes Programm mit vielfältigen Ausstattungsvarianten

Stabilität in Bewegung

Rückenteilfixierung in jeder Position vereinfacht das Schieben

Ergonomie

Einzigartige Armstützentechnik mit patientengerechter Positionierung - perfekt für Infusionstherapie

Sitz- und Liegekomfort

Weiche sitzgerechte Polsterauflage (60 cm breit), komfortabel für Groß und Klein

**Zugang**

Einfacher Einstieg von vorn oder von der Seite mit hochgeklappter Armstütze, Einstiegshöhe 54 cm

Sitzposition

Echte Stuhlposition mit Beinteil im 90° Winkel

Mobilität und Bremsen

10-cm-Doppel-Lenkrollen, wahlweise mit Zentralarretierung

MULTILINE NEXT IT – Ausstattung / Zubehör

- ♦ Infusions-/Transfusionsliege, 3 Motoren, mit/ohne Zentralarretierung, Nackenrolle, gepolsterte Armauflage

Zubehör

- ♦ LED-Leselampe
- ♦ Schonbezug Beinteil
- ♦ Akku
- ♦ Schiebebügel mit Papierrollenhalter
- ♦ Infusionsstangenhalter, schwenkbar, Einhand-Bedienung
- ♦ Infusionsstange
- ♦ Integralschaum Armauflagen
- ♦ Normschienen
- ♦ Premium Polster-Bezugsstoff
- ♦ Sitz mit druckentlastenden Federn
- ♦ Fußschalter/Notschalter

Maße und technische Daten

♦ Stuhlposition (Stellfläche)	110 x 78 cm
♦ Liegeposition (Stellfläche)	196 x 78 cm
♦ Gesamtbreite	78 cm
♦ Liegefläche (L x B)	196 x 60 cm
♦ Stärke Liegefläche	7,5 cm
♦ Armlehne (L x B)	56 x 12 cm
♦ Einstiegshöhe	54 cm
♦ Rollendurchmesser	10 cm
♦ Rücken	- 5° bis 78°
♦ Sitzteil	0° bis 22°
♦ Beinteil	0° bis 90°
♦ Maximales Patientengewicht	220 kg
♦ Spannung	230 V/50-60 Hz, 110 V/50-60 Hz
♦ Gewicht Liegen	78 kg