

# Serie 2000XL

## 2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2000-00XLE und 2001-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2000-03XLE und 2001-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2000-04XLE und 2001-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2805-..XLE entspricht Modell 2000-..XLE, jedoch mit Nasenschlitz



Modell 2000-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf zentral feststellbaren Rollen (1180N), Papierrollenhalter (1270K), mit Fußschalter anstelle von Handschalter; Polsterfarbe: 64-702 white

**KS Medizintechnik**  
Telefon: 0800 - 10 10 871  
**HIER GÜNSTIG KAUFEN**  
www.ksmedizintechnik.de

### Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Modell 2000-04XLE mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (1045N), umlaufende Fußbedienung (1960E), Nasenschlitz und Füllpolster (1610, 1620)

### Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2000-..XLE: 700 mm | Modell 2001-..XLE: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 280 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



kg

### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



### Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

#### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10  
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185  
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N  
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




#### Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E  
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E  
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

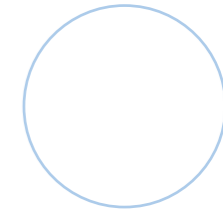

Art.-Nr. 1940-3E  
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 1950E  
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung



Art.-Nr. 1960E  
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung

#### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F  
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

#### Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080  
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1040  
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm

#### Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster für Nasenschlitz

#### Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176  
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

#### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782  
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

# Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

## Integriertes Sicherheitskonzept

entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung




Sicherheit muss gerade bei elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen an oberster Stelle stehen.

Entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung sind unsere elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen konstruktiv mit Sicherheitselementen ausgestattet, die dem Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung bzw. dem Schutz des Bedieners während der Höhenverstellung dienen:

### Doppeltipp-Aktivierung:

Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung


- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Nach 30 Sekunden Betätigung in eine Fahrtrichtung schaltet der Antrieb ab
- Freischaltung nur mit einer definierten Schaltfolge, dem Doppeltipp

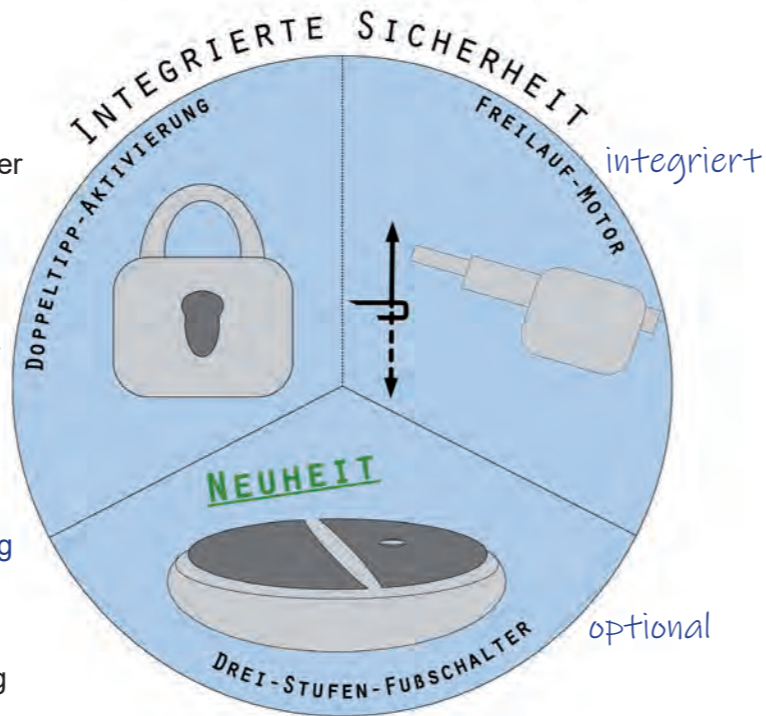

integriert

integriert

optional

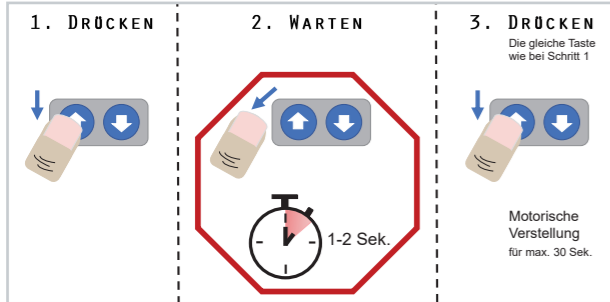

### Motor mit Freilauf-Kupplung:

Schutz des Bedieners

- Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftflusses



Ein Video zum richtigen Umgang mit der Doppeltipp-Aktivierung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal



OPTIONAL

### Drei-Stufen-Fußschalter:

Schutz des Bedieners

- Bei starkem Druck auf die Abwärtstaste wird eine dritte Stufe aktiviert. Dadurch stoppt der Motor sofort und verfährt anschließend automatisch einige cm nach oben, um den Bediener im Falle einer Einklemmung zu befreien.



# Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

## Grundausrüstung und weitere Optionen



NEUE GRUNDAUSSTATTUNG:  
HANDSCHALTER  
MIT VERSENKTEM BEDIENFELD

### Grundausrüstung bei Modellen mit elektromotorischer Höhenverstellung:



- Bedienung des Elektromotors standardmäßig durch einen **Handscharter** mit versenktem Bedienfeld
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor

### Ausstattungs Optionen:

- **Drei-Stufen-Fußschalter:**  
Aktivierung dritter Stufe durch stärkeren Druck auf die Abwärtstaste, dadurch sofortiges Stoppen des Motors und Verfahren um einige cm in die Gegenrichtung
- **Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:**  
Stange drücken = Liege fährt nach oben  
Stange anheben = Liege fährt nach unten
- **Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:**  
Stange drücken = Liege fährt nach oben  
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Neueste Informationen zur aktuellen Sicherheitstechnik finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich „Dewert-Liegen - mit Sicherheit!“



Die dritte Stufe ist nur beim Drei-Stufen-Fußschalter erhältlich, nicht bei der längsseitigen bzw. umlaufenden Fußbedienung.

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 12.2024\_01  
Änderung der technischen Daten & Irrtümer vorbehalten.