

Serie 2000XL

2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung und Trendelenburg-Einstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2052-00XLE und 2053-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2052-03XLE und 2053-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2052-04XLE und 2053-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2910-..XLE

entspricht Modell 2052-..XLE, jedoch mit Nasenschlitz



Obere 3 Abb.:
Modell 2052-00XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Comfort-
Doppelrollen (1185), Höhen-
verstellung mit Fußschalter
anstelle von Handschalter;
Polsterfarbe: 64-716 black



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Gesamte Liegefläche elektromotorisch neigbar bis 22° (Trendelenburg) in 18 Sek.
- Bedienung der elektromotorischen Neigungsverstellung durch Handschalter
- Bedienung des elektromotorischen Höhenverstellung durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung der Elektromotoren (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Elektromotorische Höhenverstellung durch Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -20° bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 500 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.500 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Modell 2052-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N), 2 Stück Seitensicherungen seitlich versenkbar (1080), Höhenverstellung mit Fußschalter anstelle von Handschalter

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 540 mm bis 980 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Neigungsverstellung bis 22° (Trendelenburg) in 18 Sek.
- Breite der Liegefläche: Modell 2052-..XLE: 700 mm | Modell 2053-..XLE: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

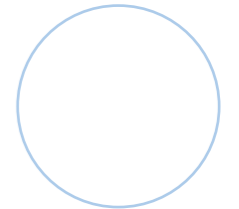

Art.-Nr. 1940-3E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 1950E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.



HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Integriertes Sicherheitskonzept

entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung




Sicherheit muss gerade bei elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen an oberster Stelle stehen.

Entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung sind unsere elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen konstruktiv mit Sicherheitselementen ausgestattet, die dem Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung bzw. dem Schutz des Bedieners während der Höhenverstellung dienen:

Doppeltipp-Aktivierung:

Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung


- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Nach 30 Sekunden Betätigung in eine Fahrtrichtung schaltet der Antrieb ab
- Freischaltung nur mit einer definierten Schaltfolge, dem Doppeltipp

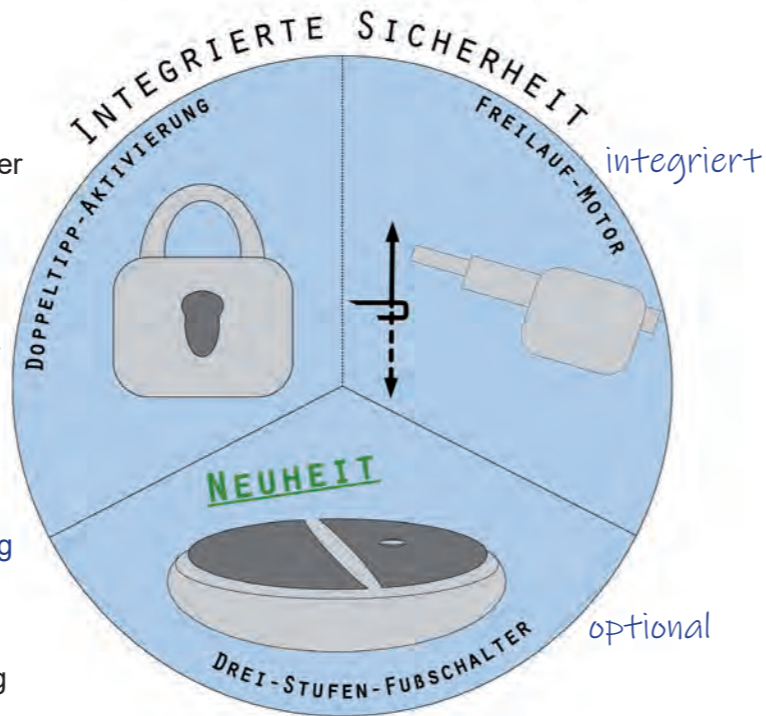

integriert

integriert

optional

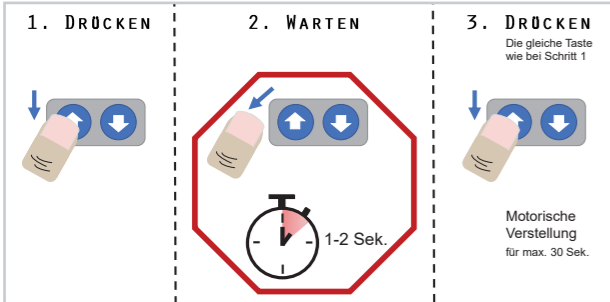

Motor mit Freilauf-Kupplung:

Schutz des Bedieners

- Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftflusses



Ein Video zum richtigen Umgang mit der Doppeltipp-Aktivierung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal



OPTIONAL

Drei-Stufen-Fußschalter:

Schutz des Bedieners

- Bei starkem Druck auf die Abwärtstaste wird eine dritte Stufe aktiviert. Dadurch stoppt der Motor sofort und verfährt anschließend automatisch einige cm nach oben, um den Bediener im Falle einer Einklemmung zu befreien.



Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Grundausrüstung und weitere Optionen



NEUE GRUNDAUSSTATTUNG:
HANDSCHALTER
MIT VERSENKTEM BEDIENFELD

Grundausrüstung bei Modellen mit elektromotorischer Höhenverstellung:



- Bedienung des Elektromotors standardmäßig durch einen **Handschalter** mit versenktem Bedienfeld
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor



Neueste Informationen zur aktuellen Sicherheitstechnik finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich „Dewert-Liegen - mit Sicherheit!“

Ausstattungsoptionen:

- **Drei-Stufen-Fußschalter:**
Aktivierung dritter Stufe durch stärkeren Druck auf die Abwärtstaste, dadurch sofortiges Stoppen des Motors und Verfahren um einige cm in die Gegenrichtung
- **Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:**
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten
- **Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:**
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Die dritte Stufe ist nur beim Drei-Stufen-Fußschalter erhältlich, nicht bei der längsseitigen bzw. umlaufenden Fußbedienung.

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 12.2024_01
Änderung der technischen Daten & Irrtümer vorbehalten.