


Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2830-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2830-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2830-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

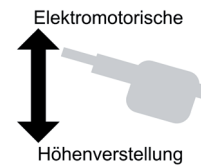

Alle Abb.: Modell 2830-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (045N), umlaufende Fußbedienung (095E), 3-teiliges Kopfteil (056); Polsterfarbe: 64-716 black



Grundausstattung:


- Liegefläche 3-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 470 mm
- Fußteil stufenlos bis +70° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem
- Fußteillänge: 940 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

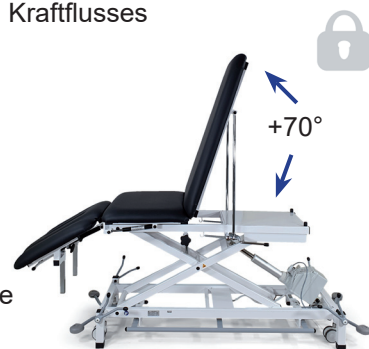

Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

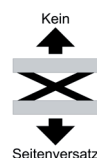

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N

Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046

Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N

Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Weitere Motorbedienelemente




Art.-Nr. 090E

1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E

1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

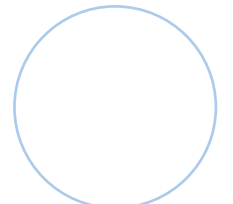

Art.-Nr. 092-3E

1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E

Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung: Stange drücken = Liege fährt nach oben Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E

Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung: Stange drücken = Liege fährt nach oben Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 065E

Dachstellung elektromotorisch

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K

Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm, nicht bei Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)



Art.-Nr. 010K/F


Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 056

Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich Abmessungen: Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Nasenschlitz

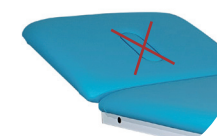

Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Armstützen



Art.-Nr. 088

1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, fest angebracht

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007

Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772

Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 12.2024_01
Änderung der technischen Daten & Irrtümer vorbehalten.



Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Integriertes Sicherheitskonzept

entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung


Sicherheit muss gerade bei elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen an oberster Stelle stehen.

Entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung sind unsere **elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen** konstruktiv mit Sicherheitselementen ausgestattet, die dem Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung bzw. dem Schutz des Bedieners während der Höhenverstellung dienen:

Doppeltipp-Aktivierung:


Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung

- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Nach 30 Sekunden Betätigung in eine Fahrtrichtung schaltet der Antrieb ab
- Freischaltung nur mit einer definierten Schaltfolge, dem **Doppeltipp**

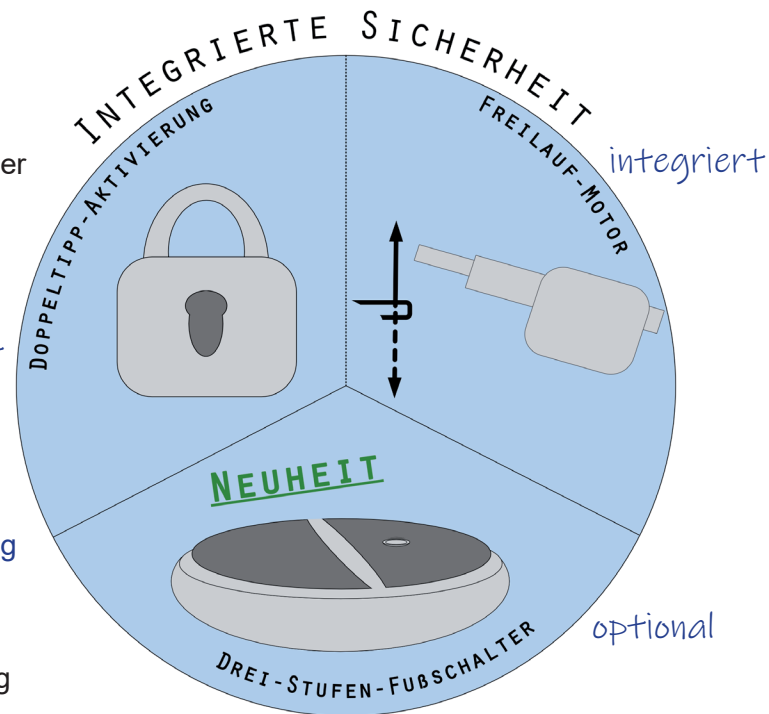

Motor mit Freilauf-Kupplung: Schutz des Bedieners

- Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftflusses

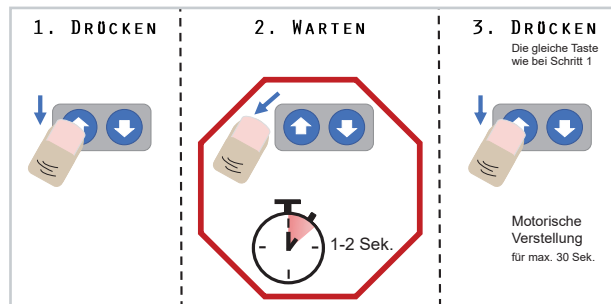


Ein Video zum richtigen Umgang mit der Doppeltipp-Aktivierung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal



OPTIONAL

Drei-Stufen-Fußschalter: Schutz des Bedieners

- Bei starkem Druck auf die Abwärtstaste wird eine **dritte Stufe** aktiviert. Dadurch stoppt der Motor sofort und verfährt anschließend automatisch einige cm nach oben, um den Bediener im Falle einer Einklemmung zu befreien.

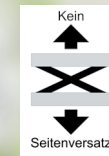

Dewert-Liegen - mit Sicherheit! Grundausrüstung und weitere Optionen



NEUE GRUNDAUSSTATTUNG:
HANDSCHALTER
MIT VERSENKTEM BEDIENFELD

Grundausrüstung bei Modellen mit elektromotorischer Höhenverstellung:



- Bedienung des Elektromotors standardmäßig durch einen **Handscharter** mit versenktem Bedienfeld
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor



Neueste Informationen zur aktuellen Sicherheitstechnik finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich „Dewert-Liegen - mit Sicherheit!“

Ausstattungs Optionen:



Drei-Stufen-Fußschalter:

Aktivierung dritter Stufe durch stärkeren Druck auf die Abwärtstaste, dadurch sofortiges Stoppen des Motors und Verfahren um einige cm in die Gegenrichtung



Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:

Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:

Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Die dritte Stufe ist nur beim Drei-Stufen-Fußschalter erhältlich, nicht bei der längsseitigen bzw. umlaufenden Fußbedienung.

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 12.2024_01
Änderung der technischen Daten & Irrtümer vorbehalten.