


Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 2830-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2830-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2830-04XL/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

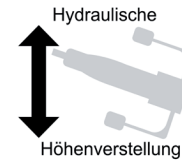

Alle Abb.:
Modell 2830-00XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (045N),
Papierrollenhalter (010K);
Polsterfarbe: 64-716 black



Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 470 mm
- Fußteil stufenlos bis +70° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem
- Fußteillänge: 940 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 530 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet


kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

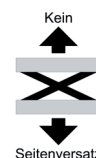

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N

Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046

Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N

Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K

Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm, nicht bei Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)



Art.-Nr. 010K/F

Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 056

Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich, Abmessungen:
Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Armstützen



Art.-Nr. 088

1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, fest angebracht

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

KS Medizintechnik

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben.
Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 12.2024_01
Änderung der technischen Daten & Irrtümer vorbehalten.