

Serie 4000E

2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 4000-00E und 4001-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)


Modell 4000-03E und 4001-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 4000-04E und 4001-04E grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 4805-..E entspricht Modell 4000-..E, jedoch mit Nasenschlitz



Alle Abb.:
Modell 4000-00E
mit Ausstattungsoption:
Rad-Hebe-System (1045N);
Polsterfarbe: 64-173 smaragd

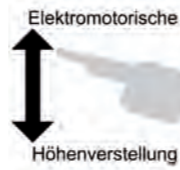

Liege in höchster Position



Liege in niedrigster Position



KS Medizintechnik
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921
HIER GÜNSTIG KAUFEN
www.ksmedizintechnik.de

Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Großer Höhenverstellbereich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 500 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.500 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 420 mm bis 970 mm in 18 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 4000E: 700 mm | Modell 4001E: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

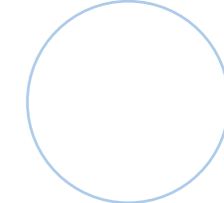

Art.-Nr. 1940-3E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 1950E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung



Art.-Nr. 1960E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Integriertes Sicherheitskonzept

entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung




Sicherheit muss gerade bei elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen an oberster Stelle stehen.

Entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung sind unsere elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen konstruktiv mit Sicherheitselementen ausgestattet, die dem Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung bzw. dem Schutz des Bedieners während der Höhenverstellung dienen:

Doppeltipp-Aktivierung:

Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung


- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Nach 30 Sekunden Betätigung in eine Fahrtrichtung schaltet der Antrieb ab
- Freischaltung nur mit einer definierten Schaltfolge, dem Doppeltipp

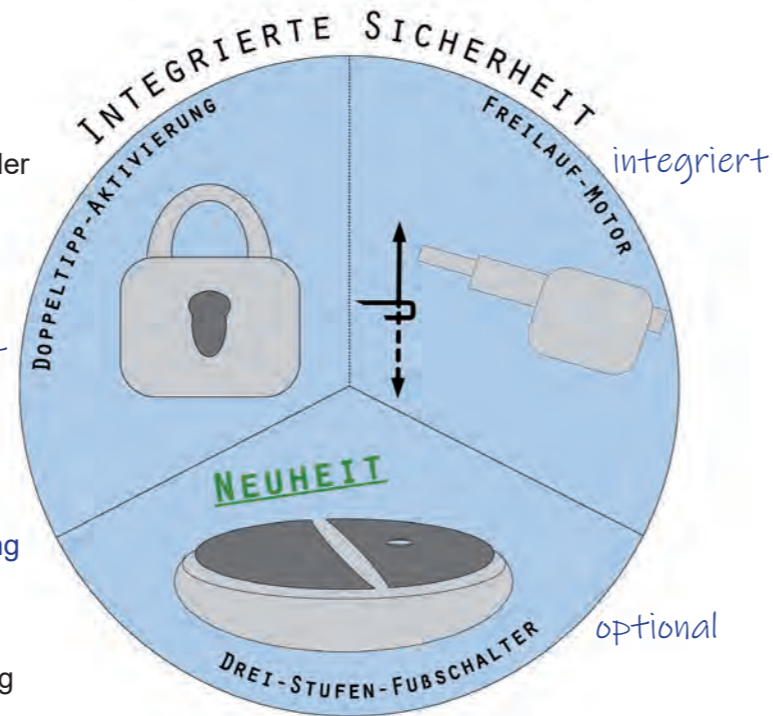

integriert

integriert

optional

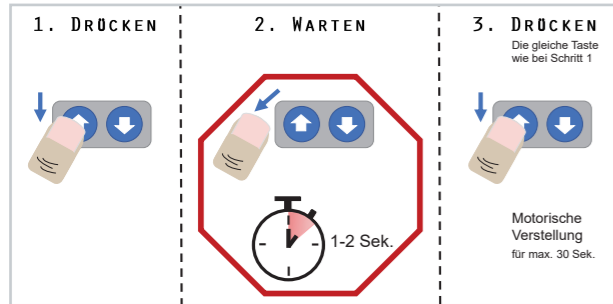

Ein Video zum richtigen Umgang mit der Doppeltipp-Aktivierung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal

Motor mit Freilauf-Kupplung:

Schutz des Bedieners

- Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftflusses



OPTIONAL

Drei-Stufen-Fußschalter:

Schutz des Bedieners

- Bei starkem Druck auf die Abwärtstaste wird eine dritte Stufe aktiviert. Dadurch stoppt der Motor sofort und verfährt anschließend automatisch einige cm nach oben, um den Bediener im Falle einer Einklemmung zu befreien.



Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Grundausrüstung und weitere Optionen



NEUE GRUNDAUSSTATTUNG:
HANDSCHALTER
MIT VERSENKTEM BEDIENFELD

Grundausrüstung bei Modellen mit elektromotorischer Höhenverstellung:



- Bedienung des Elektromotors standardmäßig durch einen **Handschalter** mit versenktem Bedienfeld
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor



Neueste Informationen zur aktuellen Sicherheitstechnik finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich „Dewert-Liegen - mit Sicherheit!“

Ausstattungsoptionen:

- **Drei-Stufen-Fußschalter:**
Aktivierung dritter Stufe durch stärkeren Druck auf die Abwärtstaste, dadurch sofortiges Stoppen des Motors und Verfahren um einige cm in die Gegenrichtung
- **Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:**
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten
- **Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:**
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Die dritte Stufe ist nur beim Drei-Stufen-Fußschalter erhältlich, nicht bei der längsseitigen bzw. umlaufenden Fußbedienung.

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 12.2024_01
Änderung der technischen Daten & Irrtümer vorbehalten.