

SERIE **DX1**

2025.1

Elektromotorische Höhenverstellung
jetzt auch mit Drei-Stufen-Fußschalter



KS **Medizintechnik**

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

Hergestellt
in
Deutschland

LANGLEBIG

ROBUST

PFLEGELEICHT



1000ER-SERIE



1030ER-SERIE



1050ER-SERIE



1090ER-SERIE



Serie DX1

Die Modelle der Serie DX1 sorgen für eine optimale Unterstützung bei der Untersuchung und Behandlung.

Die praxiserprobte und zuverlässige Höhenverstellung wird dabei wahlweise durch eine robuste Hydraulikpumpe mit optimaler Übersetzung oder einen leistungsstarken Freilauf-Elektromotor, der der neusten BfArM-Empfehlung entspricht, ermöglicht.

Ausgestattet mit unserem bewährten Liegenpolster auf Schichtholzbasis mit homogenem Polyurethan-Schaumstoff ermöglichen die Modelle der Serie DX1 einen dauerhaft angenehmen Liegekomfort.

Darüber hinaus verfügt jede Liege standardmäßig über die Dewert-Hygieneausstattung, durch die eine optimale Reinigung und Desinfektion, sowohl der Polsterteile als auch der Gestellkonstruktion, gewährleistet wird.

Somit bieten die hochwertigen Modelle der Serie DX1 beste Voraussetzungen für den jahrelangen Einsatz in der täglichen Praxis.



Inhalt

Gute Gründe für eine Liege der Serie DX1	3
Dewert-Liegen - mit Sicherheit!	4
Universalliegen für Untersuchung, Behandlung, Therapie:	
2-teilige Universalliegen:	
• Modell 1000E mit elektromotorischer Höhenverstellung	8
• Modell 1000/H mit hydraulischer Höhenverstellung	10
• Modell 1030E, mit langem Kopfteil und elektromotorischer Höhenverstellung	12
• Modell 1030/H, mit langem Kopfteil und hydraulischer Höhenverstellung	14
3-teilige Universalliegen:	
• Modell 1050E mit elektromotorischer Höhenverstellung	16
• Modell 1050/H mit hydraulischer Höhenverstellung	18
Transport- und Aufwachliegen:	
2-teilige Transport- und Aufwachliegen:	
• Modell 1090/H mit hydraulischer Höhenverstellung	20
• Modell 1093/H, mit langem Kopfteil und hydraulischer Höhenverstellung	22
3-teilige Transport- und Aufwachliegen:	
• Modell 1095/H mit hydraulischer Höhenverstellung	24
Weiteres Zubehör:	
Kissen und Polsterschutz	25





Serie DX1

Gute Gründe für eine Liege der Serie DX1






Elektromotorisch höhenverstellbare Modelle

- Höhenverstellung durch leistungsstarken AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Volllast
- EPR-Sicherheitsnetz-kabel mit Zugsicherung, 4 m Länge



Integriertes Sicherheitskonzept (nach neuester BfArM-Empfehlung)

- Automatisches Verriegeln des Elektromotors 
- Aktiver Freilauf in Abwärtsrichtung 
- Optional: Drei-Stufen-Fußschalter 

Weitere Informationen erhalten Sie auf den nächsten Seiten.

- Belastbarkeit: 225 kg



Hydraulisch höhenverstellbare Modelle

- Höhenverstellung durch starke Hydraulikpumpe mit optimaler Übersetzung für hohe Gewichte
- Stabile Tritthebel **beidseitig** der Liegefläche
- Sicherheitsverstellrichtung: Pedal treten = Liege fährt nach oben, Pedal anheben = Liege fährt nach unten
- Belastbarkeit: 225 kg



Dewert-Hygiene-Ausstattung

Ermöglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit



- Scharnierabdeckung aus identischem Bezugs-material

- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen

- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite, verschlossen mit Luftausgleichskappen mit Ventilfunktion

- Einfache Hygiene durch offene Bauweise: Gute Erreichbarkeit aller Bauteile, keine im Alterungsprozess brechenden Kunststoffabdeckungen



- Optional: Innovatives Polsterbezugs-material Skai® Toronto EN mit staynu






Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Integriertes Sicherheitskonzept

entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung

Sicherheit muss gerade bei elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen an oberster Stelle stehen.


Entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung sind unsere **elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen** konstruktiv mit Sicherheitselementen ausgestattet, die dem Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung bzw. dem Schutz des Bedieners während der Höhenverstellung dienen:

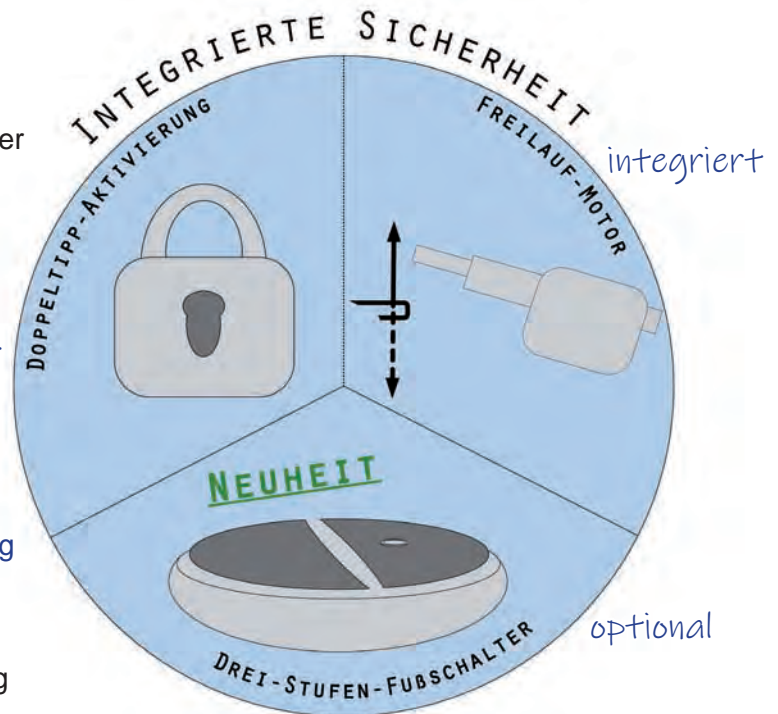

Doppeltipp-Aktivierung:

Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung

- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Nach 30 Sekunden Betätigung in eine Fahrtrichtung schaltet der Antrieb ab
- Freischaltung nur mit einer definierten Schaltfolge, dem **Doppeltipp**

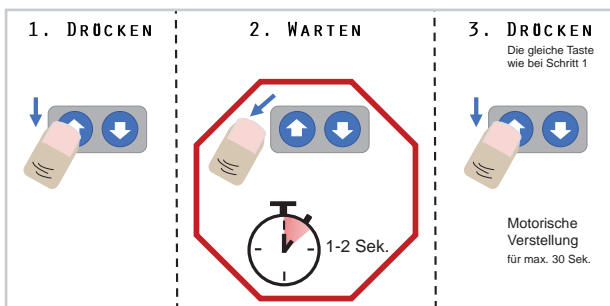

Ein Video zum richtigen Umgang mit der Doppeltipp-Aktivierung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal

Motor mit Freilauf-Kupplung:

Schutz des Bedieners

- Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftflusses



OPTIONAL



Drei-Stufen-Fußschalter:

Schutz des Bedieners

- Bei starkem Druck auf die Abwärtstaste wird eine **dritte Stufe** aktiviert. Dadurch stoppt der Motor sofort und verfährt anschließend automatisch einige cm nach oben, um den Bediener im Falle einer Einklemmung zu befreien.





Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Grundausrüstung und weitere Optionen



NEUE GRUNDAUSSTATTUNG:
HANDSCHALTER
MIT VERSENKTEM BEDIENFELD

Grundausrüstung bei Modellen mit elektromotorischer Höhenverstellung:

- Bedienung des Elektromotors standardmäßig durch einen **Handschalter** mit versenktem Bedienfeld
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor

Ausstattungsvarianten:

Drei-Stufen-Fußschalter:

Aktivierung dritter Stufe durch stärkeren Druck auf die Abwärtstaste, dadurch sofortiges Stoppen des Motors und Verfahren um einige cm in die Gegenrichtung

Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:

Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:

Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Neueste Informationen zur aktuellen Sicherheitstechnik finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich „Dewert-Liegen - mit Sicherheit!“

Serie DX1

Gute Gründe für eine Liege der Serie DX1



Langlebig ✓



Robust ✓



Pflegeleicht ✓




Bewährte Dewert-Qualität ✓

Technik:



- Liegestuhl mit stabilem Single-Frame-Scherensystem
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm

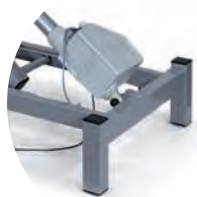


- Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße

- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt



- Verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen, spielfrei eingestellt zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte

Polsteraufbau:

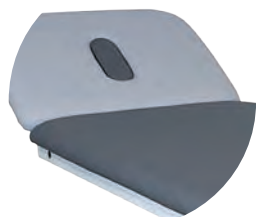

- Polsterteilstärke: 65 mm bzw. bei Aufwachliegen 70 mm mit Kaltschaumauflage
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz → keine brechende Spanplatte bei Randbelastung
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und RG 75, Ökotex-zertifiziert → kein aus Abfallschaum und chemischen Klebstoffen hergestellter Verbundschaum, der sich im schnellen Alterungsprozess aufreißt
- Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
 - Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
 - Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Reinigungsset für Skai-Produkte (Art.-Nr. 050-1000)

Inhalt:

- Zerstäuberflasche mit 200 ml Spezial-Skai-Reinigungsmittel
- 1 Mikrofaser-Pflegetuch 40 x 40 cm



Serie DX1

Gute Gründe für eine Liege der Serie DX1 ...

... mit 3-teiliger Liegefläche:



- Verstellbares Fußteil mit zusätzlichem Stahlrohrrahmen für hohe Verwindungssteifigkeit
- Druckstabile Gasdruckfeder für schwingfreies Arbeiten am Fußbereich
- Freie, nicht störende Zugänglichkeit des Bediengriffs am Fußende
- Fußteil auch als Rückenstütze einsetzbar für reversible Lagerung des Patienten



... als Transport- und Aufwachliege:



- Sehr gutes Handling beim Schieben der Liege durch vier an den Rahmenaußenpunkten platzierte Schiebegriffe
- Längs- und querseitiger Wandschutz durch großdimensionierte Wandabweisräder
- Erhöhter Liegekomfort durch Liegenpolster in halbsoft-Ausführung durch Kaltschaumaufgabe
- Seitensicherungen unter Polsterniveau absenkbar, komplett aus Stahlrohr, ohne brechende Kunststoffteile
- Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelaufrollen



Serie DX1

2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 1000-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1000-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1000-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Modell 1000-00E
mit Fußschalter anstelle von
Handschalter;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 65 mm



Modell 1000-04E mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (045N), Papierrollenhalter (010F),
Fußschalter anstelle von Handschalter;
Polsterfarbe: 64-173 smaragd

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

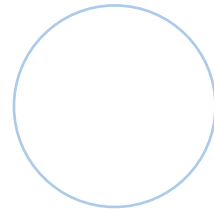

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung: Stange drücken = Liege fährt nach oben Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 096E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung: Stange drücken = Liege fährt nach oben Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 010F / 015F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. B1175 / B1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K / 015K nicht möglich

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1008
1 Paar Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 820 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Serie DX1

2-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 1000-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1000-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1000-04/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Modell 1000-00/H
in Grundausrüstung;
Polsterfarbe: 64-713 corn



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 65 mm



Modell 1000-00/H mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen (040N), Seitensicherungen (1008), Entfall Nasenschlitz (1615-EF);
Polsterfarbe: 64-716 black



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 470 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
Kopfteil belastbar bis 90 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln
feststellbaren Comfort-
Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar,
Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-
Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 125 mm,
Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit
ergonomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der Liege

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 010F / 015F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil
(70 mm vorstehend), für Liegenbreite
700 mm / 800 mm

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1008
1 Paar Seitensicherungen seitlich
versenkbar, RAL 9006 beschichtet,
Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile,
Länge 820 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. B1175 / B1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit
Halterungen, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen,
stufenlos absenk- und abnehmbar,
Verstellbereich -25° bis +45°,
Art.-Nr. 010K / 015K nicht möglich,
Abmessungen:
Kopfteil: L 550 mm x B 380 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Serie DX1

2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 1030-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1030-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)


Modell 1030-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 1030-04E mit
Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 einzeln
feststellbaren
Comfort-Doppelrollen (040N),
mit Fußschalter anstelle von
Handschalter;
Polsterfarbe: 64-703 pearl



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Langes Kopfteil in Design-Halbrund-Form
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm, ohne Nasenschlitz
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 65 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 520 mm bis 960 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

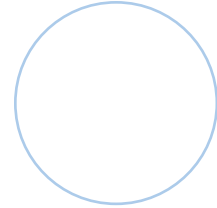

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 096E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 010K/F / 015K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1008
1 Paar Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 820 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. B1175 / B1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Serie DX1

2-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 1030-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)


Modell 1030-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1030-04/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 1030-04/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit
Zentralfeststellsystem (046);
Polsterfarbe: 64-703 pearl

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Langes Kopfteil in Design-Halbrund-Form
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 


Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm, ohne Nasenschlitz
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 65 mm



Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 510 mm bis 960 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
 - Breite der Liegefläche: 700 mm
 - Länge der Liegefläche: 1.950 mm
 - Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
- Kopfteil belastbar bis 90 kg 



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

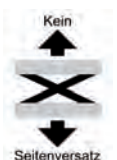

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln
feststellbaren Comfort-
Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar,
Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-
Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 125 mm,
Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit
ergonomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der Liege

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 010K/F / 015K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil
(nicht vorstehend), für Liegenbreite
700 mm / 800 mm



Seitensicherungen

Art.-Nr. 1008
1 Paar Seitensicherungen seitlich
versenkbar, RAL 9006 beschichtet,
Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile,
Länge 820 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. B1175 / B1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit
Halterungen, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 70 mm

Serie DX1

3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 1050-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1050-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1050-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 1050-00E
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit
Zentralfeststellsystem (046),
Entfall Nasenschlitz (1615-EF),
mit Fußschalter anstelle von
Handschalter;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 480 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +50° verstellbar
- Fußteillänge: 920 mm
- Polsterteilstärke: 65 mm



Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 500 mm bis 940 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

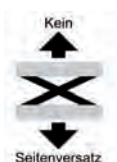

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

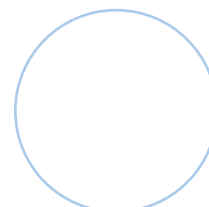

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 096E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 010K/F / 015K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. B1175 / B1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K / 015K nicht möglich



Art.-Nr. 1008
1 Paar Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 820 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Serie DX1

3-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 1050-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1050-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1050-04/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 1050-04/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 einzeln feststell-
baren Comfort-Doppelrollen
(040N);
Polsterfarbe: 64-716 black

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 480 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +50° verstellbar
- Fußteillänge: 920 mm
- Polsterteilstärke: 65 mm



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 490 mm bis 940 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
 - Breite der Liegefläche: 700 mm
 - Länge der Liegefläche: 1.950 mm
 - Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
- Kopfteil belastbar bis 90 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 010K/F / 015K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1008
1 Paar Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 820 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. B1175 / B1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K / 015K nicht möglich, Abmessungen:
Kopfteil: L 550 mm x B 380 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflege, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm



Serie DX1

2-teilige Transport- und Aufwachliege

Mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 1090-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1090-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1090-04/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 1090-04/H
mit Ausstattungsoption:
Ablagekorb mit Halterung (B1850)

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Polster mittelweich durch hochwertige Kaltschaumauflage
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +65° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 70 mm



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 500 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
Kopfteil belastbar bis 90 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. B1181
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit




Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen
mit Zentralfeststellsystem,
Ø 125 mm, Grundhöhe + 30 mm



Art.-Nr. B1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am Fußende

Papierrollenhalter

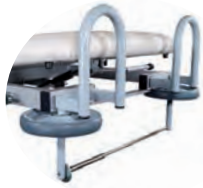

Art.-Nr. 011K / 013K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem
Kopfteil,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1090-016
Liegenbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. B1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. B1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

2-teilige Transport- und Aufwachliege Mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 1093-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 1093-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 1093-04/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 1093-04/H
in Grundaustattung;
Polsterfarbe: 64-712 slate grey

Grundaustattung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Polster mittelweich durch hochwertige Kaltschaumauflage
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 70 mm



Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 540 mm bis 990 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

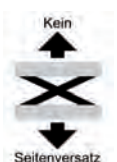

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. B1181
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen
mit Zentralfeststellsystem,
Ø 125 mm, Grundhöhe + 30 mm



Art.-Nr. B1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am Fußende

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 011K / 013K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem
Kopfteil,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1093-016
Liegenbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. B1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. B1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm



Serie DX1

3-teilige Transport- und Aufwachliege Mit hydraulischer Höhenverstellung

- Modell 1095-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 1095-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 1095-04/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 1095-00/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (B1185), Normschiene (B1410);
Polsterfarbe: 64-713 corn

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Polster mittelweich durch hochwertige Kaltschaumauflage
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +65° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 480 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +50° verstellbar
- Fußteillänge: 920 mm
- Polsterteilstärke: 70 mm



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 520 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
Kopfteil belastbar bis 90 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. B1181
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen
mit Zentralfeststellsystem,
Ø 125 mm, Grundhöhe + 30 mm



Art.-Nr. B1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am Fußende

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 011K / 013K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem
Kopfteil,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1095-017
Liegenbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. B1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben

+ Weiteres Zubehör



Keilkissen, Halbrollen, Rollen, Kissen



Art.-Nr. 1211-..*
Keilkissen,
Abm. (L x B x H):
400 x 400 x 100 - 10 mm



Art.-Nr. 1113-..*
Halbrolle,
Abm. (L x B x H):
570 x 200 x 95 mm



Art.-Nr. 1111-..*
Nackenrolle,
Abm.: L 570 x Ø 150 mm



Art.-Nr. 1112-..*
Knierolle,
Abm.: L 570 x Ø 200 mm



Art.-Nr. 1314-..*
Kissen, Klettbefestigung,
Inlett mit
Polyesterfüllung,
Abm. (L x B):
400 x 400 mm

*Der Artikelnummer bitte die jeweilige Nummer der Bezugsfarbe anfügen.

Polsterschutzmatten



Art.-Nr. 1890
Polsterschutzmatte, aus Klarsicht-
PVC-Folie, 0,8 mm Stärke,
Abm.: 700 x 600 mm

Die gesamte Dewert-Produktpalette mit zusätzlichen Zubehörartikeln finden Sie auf unserer Internetseite und in den weiteren Katalogen. Wir freuen uns auf Sie!





Änderungen der technischen Daten und Irrtümer vorbehalten.
Maße sind ca.-Angaben.
Druck- & Anzeigentechnisch kann es zu Farbabweichungen kommen.
Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

K.H. Dewert GmbH
Vollmestraße 7
33649 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: www.khdewert.de 

E-Mail: info@khdewert.de

YouTube: K.H. Dewert 



Die gesamte Dewert-Produktpalette mit zusätzlichen Zubehörartikeln finden Sie auf unserer Internetseite und in den weiteren Katalogen. Wir freuen uns auf Sie!



BEHANDLUNGS- UND THERAPIELIEGEN

SERIE DX1

1.2025_1

