


**NEU**

## Serie DX1

### 2-teilige Transport- und Aufwachliege

Mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 1093-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)  
Modell 1093-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)  
Modell 1093-04/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

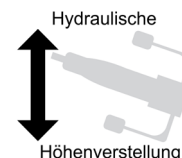

Beide Abb.:  
Modell 1093-04/H  
in Grundausstattung;  
Polsterfarbe: 64-712 slate grey




#### Grundausstattung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Polster mittelweich durch hochwertige Kaltschaumauflage
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

#### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 70 mm

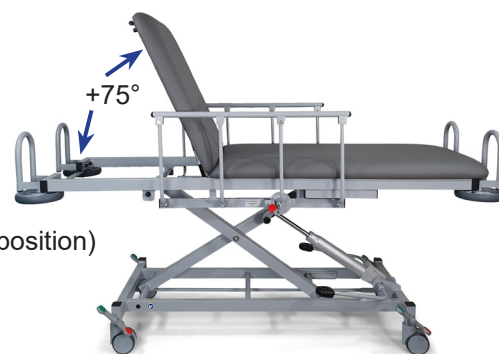

#### Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 540 mm bis 990 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
- Kopfteil belastbar bis 90 kg



#### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

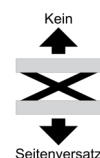

#### Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

##### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1181  
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit



Art.-Nr. B1185  
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 30 mm



Art.-Nr. B1199  
Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende

##### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 011K / 013K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

##### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1093-016  
Liegenbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

##### Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410  
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430  
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. B1450  
1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. B1850  
Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

**KS Medizintechnik**  
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

**HIER GÜNSTIG KAUFEN**

www.ksmedizintechnik.de