

Serie DX1


3-teilige Transport- und Aufwachliege

Mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 1095-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1095-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1095-04/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

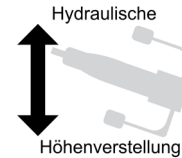

Beide Abb.:
Modell 1095-00/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen mit Zentralfeststellsystem
(B1185), Normschiene (B1410);
Polsterfarbe: 64-713 corn

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Polster mittelweich durch hochwertige Kaltschaumauflage
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +65° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 480 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +50° verstellbar
- Fußteillänge: 920 mm
- Polsterteilstärke: 70 mm




Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 520 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
- Kopfteil belastbar bis 90 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

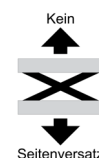

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1181
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen
mit Zentralfeststellsystem,
Ø 125 mm, Grundhöhe + 30 mm



Art.-Nr. B1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am Fußende

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 011K / 013K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem
Kopfteil,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1095-017
Liegenbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. B1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben

KS Medizintechnik

Telefon: 0800 - 10 10 871

seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

Stand 06.2022_01

Änderung der technischen Daten vorbehalten

