



medical **ECONET**  
GERMANY



## PalmcareDUO

Mobiler Patientenmonitor

- Überwachung von SpO2, Puls, EKG mit Respiration und Herzrate
- 4,3" Touchscreen Monitor
- Mobile Nutzung durch kompakte Bauweise
- Komfortable Bedienung per Touchscreen
- Bis zu 28 Betriebsstunden mit wiederaufladbarem Akku
- Patientenspeicher mit zahlreichen Patientenwerten
- Audiovisuelle Alarmer
- Kostenlose Datenmanagement Software

**KS** **Medizintechnik**  
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

**HIER GÜNSTIG KAUFEN** 

[www.ksmedizintechnik.de](http://www.ksmedizintechnik.de)

# Technische Spezifikationen

Durch das PalmcareDUO kann auf einfache und präzise Weise die Blutsauerstoffsättigung (SpO2) und das EKG eines Patienten gemessen und überwacht werden.

Die kompakte Größe, das leichte Gewicht und der integrierte Lithium-Ionen-Akku (für eine ca. 28-stündige netzunabhängige Betriebsdauer) ermöglichen zudem den mobilen Einsatz des Gerätes.

Der 4,3 Zoll Touchscreen-Monitor kann durch leichtes antippen bedient werden und stellt die ermittelten Ergebnisse im Anschluss übersichtlich anhand eines Trendspeichers und einer Werteübersichtstabelle dar.

Um die gemessenen Werte langfristig überwachen und vergleichen zu können, befindet sich ein umfangreicher Speicherplatz auf dem Gerät für ca. 96 Patienten mit jeweils 500 Messdaten.


Das EKG kann mit einem 3-adrigen EKG-Kabel 3 Kanäle und mit dem 5-adrigen EKG-Kabel 7 Kanäle ableiten.




Bildschirm	Touchscreen 4,3" Drehbar in alle 4 Richtungen
Betriebsdauer	bis zu 28 Stunden Ladedauer: ca. 4 Stunden
Patientenspeicher	96 Datensätze
Anzahl Patientenwerte	500 Daten (keine Kurven)
Alarm	Audiovisuell
Batterie	Lithiumbatterie 3,7 V
Abmessungen	(HxBxT): 142 x 78 x 36 mm
Gewicht	350g inkl. Akku
<b>Vitalwerte</b>	SpO2, Puls Optional: Respiration, Herzrate 3-Kanal EKG, 7-Kanal EKG
Standard Zubehör	1x SpO2 Fingerclip 1x USB-Kabel 1x Netzadapter Klebelektroden 3-adriges EKG Kabel (optional) 5-adriges EKG Kabel (inkludiert)



Parameter-Anzeige

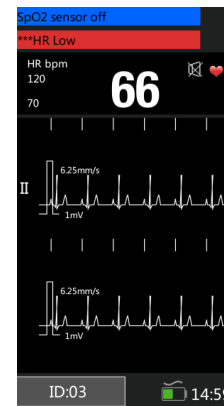

EKG-Anzeige

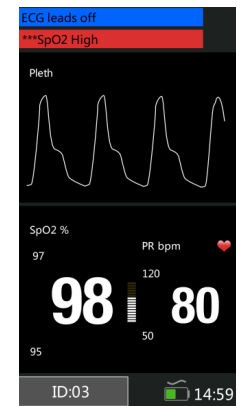

SpO2-Anzeige



Im Erlengrund 16, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com  
f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com  
facebook.com/medicaleconetgermany  
twitter.com/medicaleconet

Fachhändler

\*Änderungen vorbehalten