

cardiofax^C

Elektrokardiograph ECG-3150

Hochwertige Diagnosen immer in Ihrer Reichweite



KS Medizintechnik
seit 1921

Karhäuser Straße 21
34587 Felsberg
Kostenlose Servicehotline
Tel.: 0800 - 10 10 871

www.ksmedizintechnik.de
info@ksmedizintechnik.de

[Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->](#)

Hochwertige Diagnosen immer in Ihrer Reichweite

Hochwertige Diagnosen

Präzise Daten für eine schnellere Diagnose

Die fortschrittliche Filtertechnologie eliminiert Rauschen mit weniger Kurvenverzerrungen. Nihon Kohdens ECAPS 12C EKG-Analyseprogramm liefert mehr als 200 Ergebnisse mit detaillierter Analyse. Es basiert auf einer Konturendatenbank mit 13.000 EKGs und einer Rhythmusdatenbank mit 19.000 EKGs.


Plötzliche Arrhythmien erkennen

Das farbige, 5 Zoll große TFT-Display ermöglicht eine klare 12-Kanal-Kurvenüberwachung und reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Zweitmessung. Der interne 3-Minuten-EKG-Speicher (mit 12 Ableitungen) stellt sicher, dass alle wichtigen Informationen erhalten bleiben.

Hochwertige Untersuchungen jederzeit und überall


Ein geringes Gewicht und die kompakte Bauweise garantieren Ihnen eine einfache und mühelose Handhabung. Die langlebige Batterie ermöglicht eine qualitativ hochwertige und mobile Untersuchung, überall.

*180 Minuten oder mehr, abhängig von den Anwendungsfaktoren.

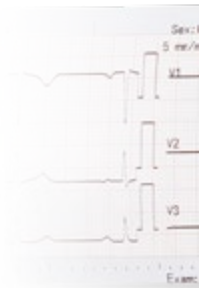

Hochwertige Verfügbarkeit der Patientendaten


Cardiofax C (ECG-3150) unterstützt verschiedene Arten der Datenausgabe, die über LAN oder ein eingebautes WLAN-Modul erfolgt.

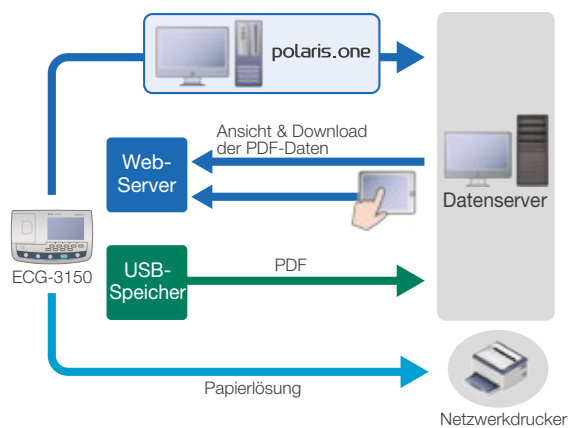

Mit der Abfragefunktion können die Daten eines Patienten in das Cardiofax C heruntergeladen werden, um sie mit der bevorstehende EKG-Untersuchung zu verknüpfen. Zusammen mit Nihon Kohdens EKG-Portfolio und dem Workflow-Management-Tool polaris.one steht eine starke Systemlösung zur Verfügung.


Der „Webserver“ des Cardiofax C bietet eine einfache Lösung für die Datenverwaltung (Ansicht und Download als PDF-Datei über Webbrowser*).

*Für den Einsatz im internen Netzwerk ist ein kompatibler Webbrowser und sowie Umgebung erforderlich.

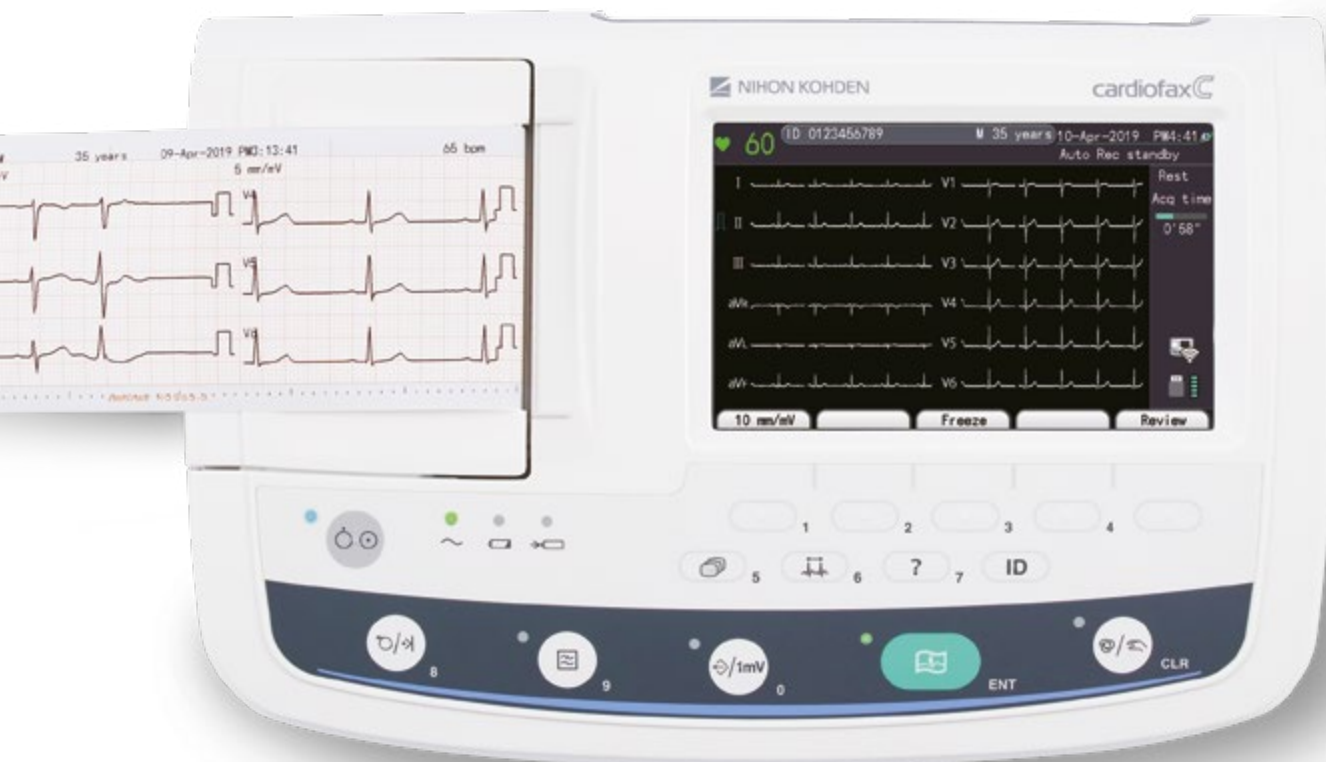

Druckbeispiele

12-Kanal-EKG (3 Kurven x 4 Gruppen) mit Analyseergebnissen

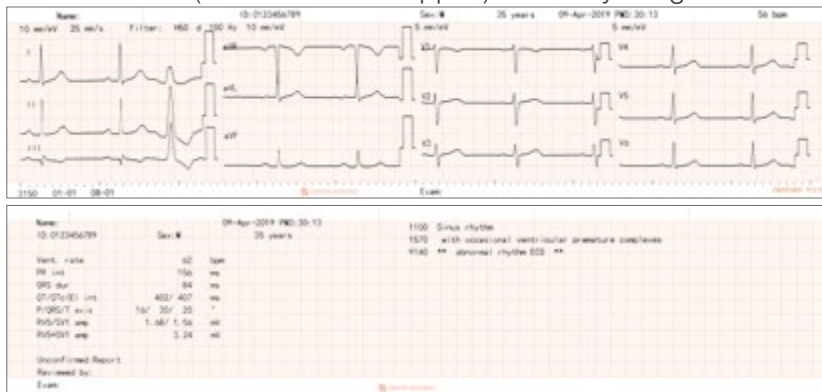

1-kanalige Rhythmus-Aufzeichnung



Optionen



- Gerätewagen, KD-105D/E
- Kabelhalterung, KH-100D
- USB Speichermedium, DTSE9G2/16GB oder gleichwertig
- W-LAN-Modul, QI-330D
- Batteriepack, SB-301DC

Spezifikationen Cardiofax C (ECG-3150)

Abmessungen	260 B x 75 H x 172 T mm
Gewicht	1,1 kg (ohne Netzteil, Batterie und Aufzeichnungspapier)
Batteriebetriebsdauer	180 Minuten
Größe, Auflösung, Art des Bildschirms	5 Zoll, 800 x 480 Dpi, Farbiges TFT-Display
Anzahl der Ableitungen	3
Papiergeschwindigkeit	25, 50 mm/s
Papierbreite	63 mm breit
Sicherheits- und Leistungsnormen	IEC 60601-1 Ed3.1: 2012, IEC 60601-2-25: 2011, IEC 60601-1-2: 2014