

KS **Medizintechnik**

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

Ihr Partner für
medizinisches Mobiliar



A Sense of Company

Mehr als 90 Jahre Erfahrung machen SCHMITZ zu einem der international führenden Hersteller von medizintechnischen Produkten.

Tradition im Familienunternehmen wird gelebt. 18 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit zeigen eine hohe Identifikation mit unseren Werten und der Firmenphilosophie.

Seit 2012 führen Friedrich und Matthias Schmitz das Unternehmen in der vierten Generation.

Wir bekennen uns zum Standort Deutschland und sind mit unserer Heimatregion tief verwurzelt. Wir entwickeln und fertigen hier.

Wir arbeiten mit Zulieferern, die zu 90 % aus Deutschland und zu 60 % aus der Region stammen.

Made in Germany





A Sense of Care

Wir verstehen und leben Dienstleistungen mit dem Anspruch einer hohen Kundenzufriedenheit. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Einrichtung.


Wirtschaftlichkeit durch Langlebigkeit, das können Sie von uns erwarten.

Mit einem durchdachten Servicekonzept und einer umfassenden Betreuung steht SCHMITZ von Anfang an als Partner an Ihrer Seite.

Technischer Kundenservice

T +49 (0)2377 84 550

service@schmitz-soehne.de

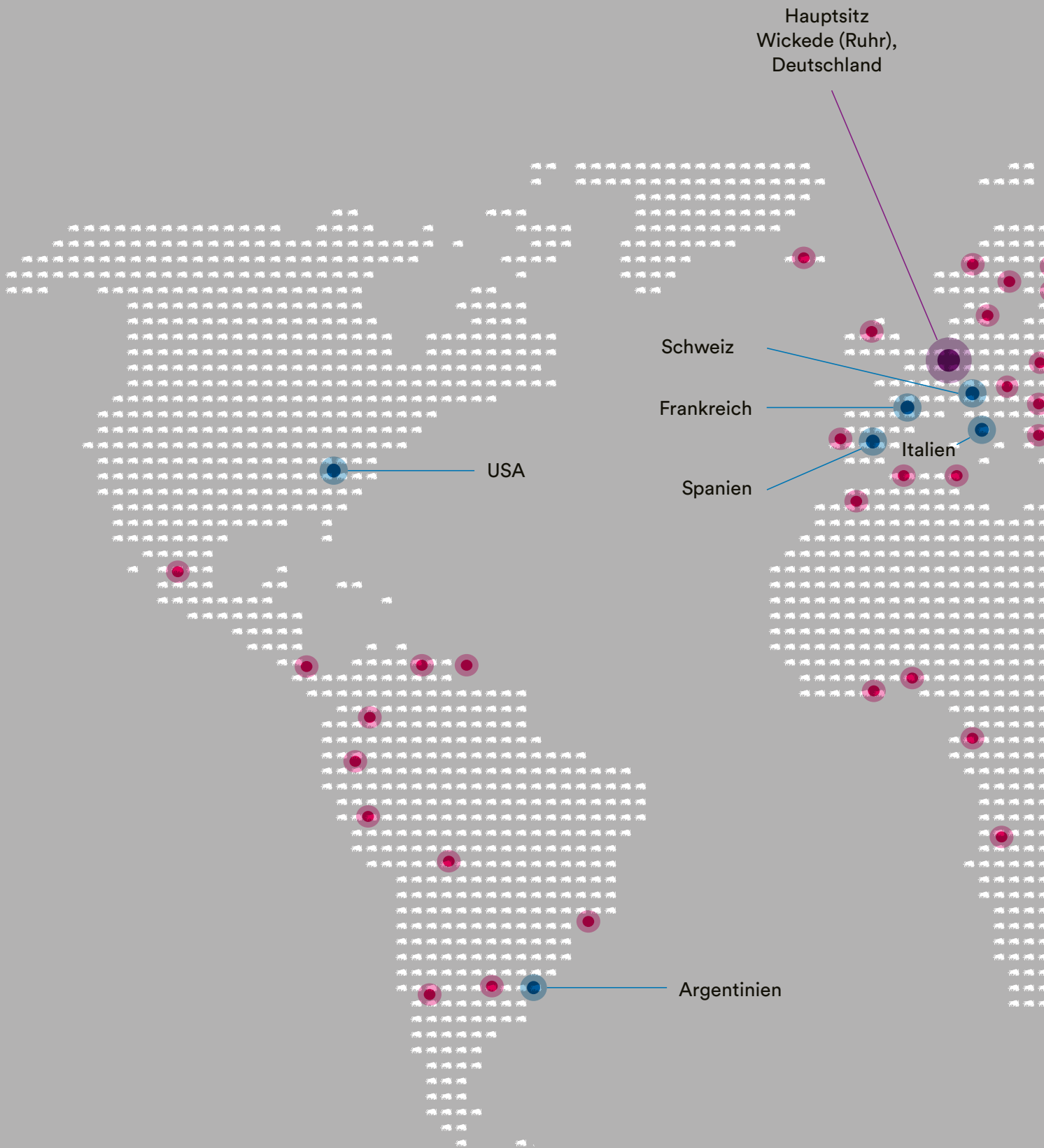

- International über 80 Handelspartner
- Vertriebsniederlassungen

SCHMITZ – weltweit vertreten







varimed®

Liegen, Hocker, Vielzwecktische

Die unentbehrlichen Helfer für die tägliche Routine

Qualität und Langlebigkeit

Hochwertige Materialien in Kombination mit erstklassiger Verarbeitungsqualität gewährleisten die Langlebigkeit unserer Produkte.

Der Helfer im Alltag

medi-net Vielzwecktisch – unser zuverlässiger Helfer begleitet Sie verlässlich durch den Tag.







Untersuchungsliege 211.1080.0
Polster goldorange 106, Lackierung graualuminium RAL 9007



EKG-Untersuchungsliege 211.1310.0
Polster lavendellila 107, Lackierung weißaluminium RAL 9006



Untersuchungs- und Massageliege 211.9301.0
Polster karminrot 92, Lackierung graualuminium RAL 9007



Aufwachliege 211.9501.0
Polster blütenweiß 84, Gestell verchromt





Untersuchungsliege 211.1180.0
Polsterfarbe eisblau 108, Lackierung grauweiß RAL 9002
Untersuchungsliege 211.1190.0
Polsterfarbe agavengrün 109, Gestell verchromt


varimed® Liegen


¹ classic
² comfort

Modell-Nr. Beschreibung

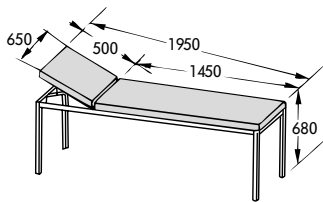

211.1080.0 Untersuchungsliege³ 
Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, Polster 50 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, 680 x 650 mm (H x B), sichere Arbeitslast: 225 kg.

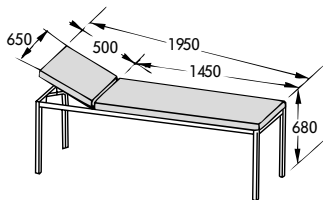


211.1180.0 Untersuchungsliege³ 
Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung + 40°, 680 x 650 mm (H x B), sichere Arbeitslast: 225 kg.

211.1190.0 Untersuchungsliege 
Ausführung wie 211.1180.0, jedoch Gestell verchromt.



200.0970.0 Papierrollenhalter
für Papierrollen bis 500 mm Breite

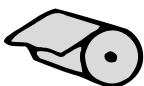

200.1030.0 Papierrolle
500 mm breit



200.6500.0 Gestellbeschichtung
(o. Abb.) nach Farbkarte für 211.1080.0 und 211.1180.0

Hinweis!
In der Orthopädie und für die Massage empfiehlt es sich, Liegen mit Längs- und Querverstrebung einzusetzen.

Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!


200.4380.0 Nasenschlitz im Kopfteil
(o. Abb.) für Liegen 211.1180.0 und 211.1190.0

200.4390.0 Füllstück für Nasenschlitz
(o. Abb.)

- ¹ 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,
- ² 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).
Bitte Seite 40 beachten.
- ³ Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007.
Bitte bei Bestellung angeben.

varimed® Liegen

¹ classic
² comfort

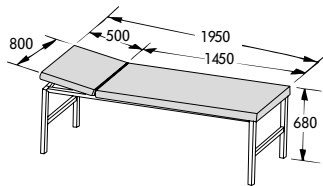

Modell-Nr. Beschreibung

211.1310.0 EKG-Untersuchungsliege³

Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, mit Querverstrebung, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung + 40°, 680 × 800 mm (H x B), sichere Arbeitslast: 225 kg.

211.1320.0 EKG-Untersuchungsliege

Ausführung wie 211.1310.0, jedoch Gestell verchromt.



200.0940.0 Papierrollenhalter
für 800 mm breite Liegen



200.1030.0 Papierrolle
500 mm breit

200.5100.0 Längsstrebe

(o. Abb.) pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, für 211.1310.0

200.5110.0 Längsstrebe

(o. Abb.) verchromt, für 211.1320.0

200.5120.0 Längsstrebe

(o. Abb.) pulverbeschichtet nach Farbkarte

200.6500.0 Gestellbeschichtung

(o. Abb.) nach Farbkarte, für 211.1310.0

¹ 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,

² 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).

Bitte Seite 40 beachten.

³ Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.

Modell-Nr. Beschreibung

200.0000.0 Sonderanfertigung andere Höhen
(o. Abb.) bis max. 830 mm, ab 700 mm Höhe mit
Quer- und Längsstrebe, für 211.1180.0 bis 211.1320.0.

200.0010.0 Sonderanfertigung Fahrbarkeit
(o. Abb.) für 211.1180.0 bis 211.1320.0. 4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend,
1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern
Ø 150 mm, Längsverstrebung zur Stabilisierung.
Rollen kontaktverfärbungs- und abriebfrei.
(Angabe der gewünschten Gesamthöhe erforderlich)

200.0020.0 Sonderanfertigung kleinere und größere Breiten⁴
(o. Abb.) bis 150 mm (Maximalbreite 900 mm) für
211.1180.0 bis 211.1320.0.

200.0030.0 Sonderanfertigung kleinere und größere Längen⁴
(o. Abb.) bis 150 mm für 211.1180.0 bis 211.1320.0.

⁴ Sollte beides, 200.0020.0 und 200.0030.0, anfallen,
so wird der Aufpreis nur einmal berechnet.




Schwerlastliege 211.1330.0
Polster karibikblau 82, Gestell verchromt

varimed® Liegen

¹ classic
² comfort

Modell-Nr. Beschreibung

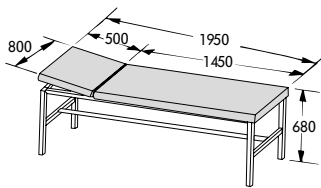

211.1330.0 **Schwerlastliege**

Gestell verchromt, mit Quer- und Längsverstrebung,
Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße,
Kopfteilverstellung +40°, 680 × 800 mm (H x B),
sichere Arbeitslast: 300 kg.
In fahrbarer Ausführung und in Sonderabmessungen
nicht lieferbar!



200.0940.0 **Papierrollenhalter**
für 800 mm breite Liegen




200.1030.0 **Papierrolle**
500 mm breit

- ¹ 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,
² 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).
Bitte Seite 40 beachten.

varimed® **Fahrbare Liegen und Aufwachliegen**¹ classic
² comfort


Modell-Nr. Beschreibung

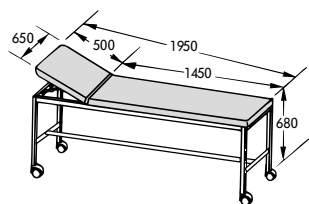**211.9301.0 Untersuchungs- und Massageliege³**

Gestell aus Vierkantrrohr, mit Quer- und Längsstrebe, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Polster 70 mm, 2-teilig, Kopfteilverstellung +40°, 680 × 650 mm (H x B), sichere Arbeitslast: 225 kg

211.9351.0 Untersuchungs- und Massageliege

Ausführung wie 211.9301.0, jedoch Gestell verchromt.

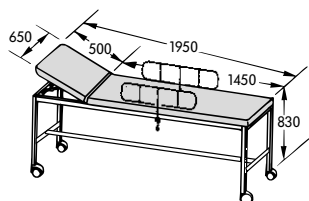**211.9501.0 Aufwachliege**

Gestell aus Vierkantrrohr, mit Quer- und Längsstrebe, verchromt, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Polster 70 mm, 2-teilig, Kopfteilverstellung +40°, 830 × 650 mm (H x B), 2 Seitengitter mit Befestigungsstücken, verchromt, absenkbar bis auf Polsterhöhe. Sichere Arbeitslast: 225 kg

211.9511.0 Aufwachliege

Ausführung wie 211.9501.0, jedoch Gestell verchromt, Höhe 680 mm.

**Alle Liegenpolster
mit Sicherheitsabstand
zum Rahmen!**

- ¹ 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,
- ² 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).
Bitte Seite 40 beachten.
- ³ Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007.
Bitte bei Bestellung angeben.




Modell-Nr. Beschreibung


200.0970.0 Papierrollenhalter
für Papierrollen bis 500 mm Breite.



200.1030.0 Papierrolle
500 mm breit.

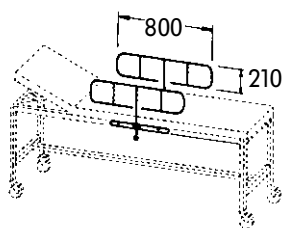


200.4900.0 1 Seitengitter und 1 Seitenschiene
verchromt, mit Befestigungskloben, für Vierkantrohrliegen, absenkbar bis auf Polsterhöhe. Seitengitter auf Seitenschiene verschiebbar.

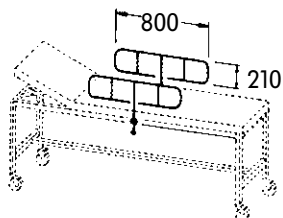

200.4950.0 1 Seitengitter mit Befestigungsstück
zur festen Verschraubung an Vierkantrohrliegen, verchromt, absenkbar bis auf Polsterhöhe.

200.0020.0 Sonderanfertigung größere Breite von 800 mm
(o. Abb.) für Liegen 211.9301.0 bis 211.9511.0

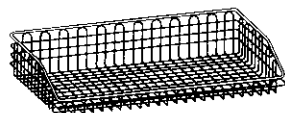

200.5500.0 Ablagekorb
zum Einhängen an Längs- und Querstrebe, Korb 520 x 490 x 140 mm, aus Edelstahl.

200.6500.0 Gestellbeschichtung
(o. Abb.) nach Farbkarte, für 211.9301.0.

Alle Rollen sind kontaktverfärbungs- und abriebfrei!



- Ergonomisches Arbeiten durch großen Höhenverstellbereich
- Bei Verstellung kein Versatz des Oberteles
- Beinfreiheit durch ausgeformtes Unterteil



Sperrschalter zum Aktivieren und Deaktivieren des Bedienelements.




Wahlweise Hand- oder Fußbedienung für 211.4200.0 und 211.4210.0

varimed® 

Höhenverstellbare Untersuchungs- und Behandlungsliegen

¹ classic
² comfort

Modell-Nr. Beschreibung

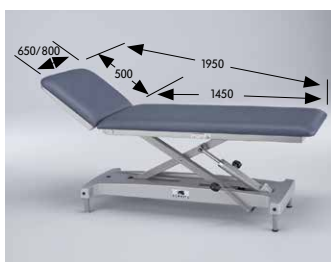


211.4100.0 Untersuchungs- und Behandlungsliege³

Hydraulische Höhenverstellung über beidseitigen Fußpumpenhebel von 500 bis 920 mm. Kopfteil über Gasfeder verstellbar von -20° bis $+40^\circ$. Polster 70 mm, 2-teilig. Polsterbezug nach SCHMITZ-Farbkarte. Gestell pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006, grau-aluminium RAL 9007 oder grauweiß RAL 9002. Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau. Mit 4 Nivellierfüßen. Sichere Arbeitslast: 225 kg

211.4110.0 Untersuchungs- und Behandlungsliege³

Ausführung wie Untersuchungs- und Behandlungsliege 211.4100.0, jedoch 800 mm breit.

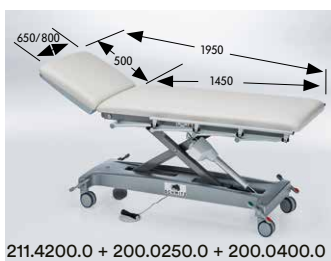

211.4200.0 + 200.0250.0 + 200.0400.0

211.4200.0 Untersuchungs- und Behandlungsliege³

Höhenverstellung elektromotorisch von 500 bis 920 mm über Fußbedienung, ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert das Bedienelement, Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil, sonst Ausführung wie 211.4100.0. Auf Wunsch statt Fußbedienung auch Handbedienung ohne Mehrpreis lieferbar.

211.4210.0 Untersuchungs- und Behandlungsliege³

Ausführung wie Untersuchungs- und Behandlungsliege 211.4200.0, jedoch 800 mm breit.

- ¹ 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,
- ² 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).
Bitte Seite 40 beachten.
- ³ Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007.
Bitte bei Bestellung angeben.

varimed® C€^{MD}

Höhenverstellbare Untersuchungs- und Behandlungsliegen

Modell-Nr. Beschreibung



200.0250.0 Fahrbarkeit

4 geschlossene Doppelrollen Ø 100 mm,
2 davon elektrisch leitend, Zentralfeststellung je Achse,
1 Rolle mit Richtungsfeststeller.
(Der Höhenverstellbereich bleibt gleich.)

**Fahrbarkeit zum Nachrüsten durch unseren Service
verfügbar, bitte sprechen Sie uns an!**



200.0400.0 Seitengitter, Paar

Länge: 990 mm, unter Liegeflächenniveau versenkbar,
pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006.



200.0350.0 Aufnahme für Fußbedienung

für Untersuchungs- und Behandlungsliegen 211.4200.0
und 211.4210.0, aus Stahl, pulverbeschichtet weiß-
aluminium RAL 9006, zur Montage an der Längsseite
der Liege (nachrüstbar).

200.0930.0 Papierrollenhalter

(o. Abb.) für Papierrolle bis 590 mm Breite.

200.1030.0 Papierrolle

(o. Abb.) 500 mm breit.

200.0410.0 Stoßschutz

(o. Abb.) aus Kunststoff, grau, an allen vier Polsterecken mon-
tiert.

200.0500.0 Nasenschlitz im Kopfteil

(o. Abb.)

200.0510.0 Füllstück für Nasenschlitz

(o. Abb.)

Modell-Nr.	Beschreibung
200.4402.0 (o. Abb.)	Seitenschiene beidseitig montierbar, 25 × 10 × 750 mm, sichere Arbeitslast 30 kg, nicht möglich in Kombination mit Seitengittern 200.0400.0, für 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 und 211.4210.0.
200.0251.0 (o. Abb.)	EKG Abschirmung mit je einem Potentialausgleichsstecker links und rechts sowie einer Abschirmplatte zur Reduzierung von Störgrößen, passend für 650 mm breite Liegen.
200.0252.0 (o. Abb.)	EKG Abschirmung wie 200.0251.0, jedoch passend für 800 mm breite Liegen.
200.6530.0 (o. Abb.)	Gestellbeschichtung nach Farbkarte.



varimed® Drehhocker, Untersuchungssitze, Medizinisches Mobiliar

¹ classic
² comfort

Modell-Nr. Beschreibung

222.2810.0 Drehhocker



5-strahliger Kunststoff-Fuß, schwarz, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen, für glatte/harte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung.
Sitz kunstlederbezogen, Doppelrollen für Teppichböden bei Bestellung angeben. Sichere Arbeitslast: 135 kg

200.8000.0 Gestell pulverbeschichtet nach Farbkarte

Säule verchromt.

222.2760.0 Drehhocker



5-strahliger Aluminium-Fuß, poliert, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen für glatte/harte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung.
Sitz kunstlederbezogen. Doppelrollen für Teppichböden bei Bestellung angeben.
Sichere Arbeitslast: 135 kg

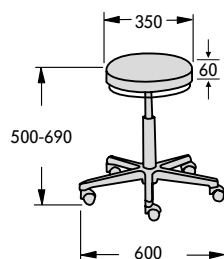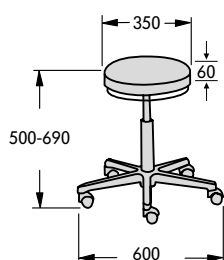

- ¹ 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,
² 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).
Bitte Seite 40 beachten.

varimed® Drehhocker, Untersuchungssitze, Medizinisches Mobiliar

¹ classic
² comfort

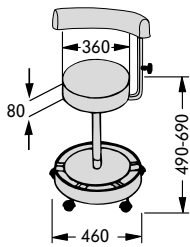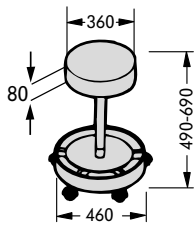

Modell-Nr. Beschreibung

222.1550.0 Untersuchungssitz

Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug nach Farbkarte, Gasfederhöhenverstellung von 490 bis 690 mm, mit Fußringauslösung, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte / harte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz.
Sichere Arbeitslast: 135 kg

222.1570.0 Untersuchungssitz


Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug nach Farbkarte, Gasfederhöhenverstellung von 490 bis 690 mm, mit Fußringauslösung, Rückenlehne mit Kunstleder bezogen, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte/harte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz.
Sichere Arbeitslast: 135 kg

200.0011.0 Gebremste Rollen

bei Belastung gebremst, unbelastet frei beweglich.
Passend für die Modelle 222.1550.0 und 222.1570.0

- ¹ 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,
² 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).
Bitte Seite 40 beachten.


¹ classic
² comfort

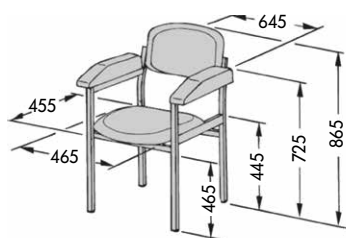

Modell-Nr. Beschreibung

221.1860.0 Untersuchungs- und Blutentnahmestuhl³ c€^{MD}
Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007. Sitz, Rückenlehne und Armlehnen kunstlederbezogen. Anlieferung in zerlegter Ausführung. Sichere Arbeitslast: 225 kg

200.6610.0 Gestellbeschichtung
gemäß Farbkarte

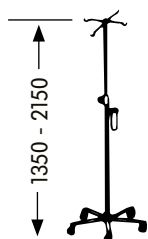


242.2351.0 Infusionsständer* c€^{MD}
Fahrbare 5-Fußkreuz-Konstruktion aus CrNi-Stahl 18/10, Doppelrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen mit Feststeller, elektr. leitend. Oberteil mit 4 Haken aus Kunststoff, Tropfangglas, Einhandhöhenverstellung von 1350 bis 2150 mm, Stellfläche 635 mm. Sichere Arbeitslast pro Haken: 2 kg.

- ¹ 3 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic (Aufpreis),
- ² 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).
Bitte Seite 40 beachten.
- ³ Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007.
Bitte bei Bestellung angeben.



medi-net Vielzwecktisch 233.6060.0,
Gestell graualuminium RAL 9007

varimed® medi-net Vielzwecktisch

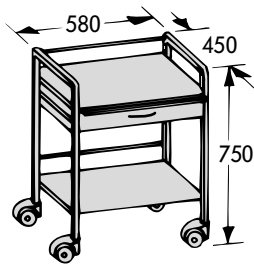

Modell-Nr.	Beschreibung
------------	--------------

233.6060.0	medi-net Vielzwecktisch³
-------------------	--

	Gestell aus Vierkantrrohr, zerlegbar, pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, Schublade mit vormontierten kugelgelagerten schwarz verzinkten Präzisions-schienen, Tischplatte, Boden und Schubladenblende kunststofffurniert, perlweiß 60, Bügelgriff für Schubladenblende pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, 4 Doppelrollen Ø 75 mm. Der medi-net-Tisch 233.6060.0 kann zusätzlich zur vorhandenen Schublade mit maximal 2 Schubladen ausgestattet werden! Anlieferung in zerlegter Ausführung.
--	---

**medi-net
sichere Arbeitslast**
Gesamt: bis 50 kg
Schubladen: bis 10 kg
Tischplatte/Boden:
bis 20 kg

201.3000.0	1 Schublade mit Bügelgriff, zusätzlich
-------------------	--

200.6600.0	Gestell pulverbeschichtet nach Farbkarte
-------------------	---

200.6650.0	Bügelgriff pulverbeschichtet nach Farbkarte
-------------------	--

³ Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.



medi-net Vielwecktisch 233.6060.0
mit Zubehör für Injektionsarbeitsplatz
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0



medi-net Vielwecktisch 233.6060.0
mit Zubehör für Ergometrie-arbeitsplatz
201.1300.0 (ohne Geräte)



medi-net Vielwecktisch 233.6060.0 + 201.0050.0
mit Zubehör für Heimdialyse 201.1800.0, 201.1250.0
(ohne Geräte)



Injektionsmittelspender 201.1610.0



Injektionsmittelspender 201.1650.0



varimed® Zubehör für medi-net Vielzahlstisch

Modell-Nr. Beschreibung


201.3000.0 1 Schublade
(o. Abb.) mit Bügelgriff, Laufschiene, zur Nachrüstung
(Innenmaße: 510 × 413 × 90 mm, B x T x H)


201.0050.0 2 feststellbare Rollen
75 mm Ø.

201.1300.0 Kabelausleger
und Befestigungskloben 201.1910.0, 16 mm Ø.

201.1170.0 1 runde Schale
aus CNS 18/10, 320 mm Ø,
mit Befestigungskloben 201.1900.0, 10 mm Ø.


201.1250.0 Infusionsstange CE MDD
mit 4 Haken und Befestigungskloben 201.1920.0,
18 mm Ø, 2-teilig, sichere Arbeitslast: pro Haken 2 kg.

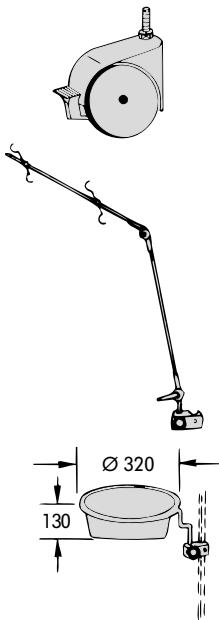

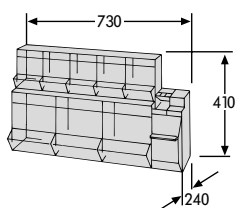


Modell-Nr. Beschreibung


201.1610.0 Injektionsmittelspender
 grau, First-in/First-out-system, mit Kombi-Set Tupfer-
 spender und -Befeuchter, zusätzlich 201.1700.0 Befesti-
 gungswinkel erforderlich.

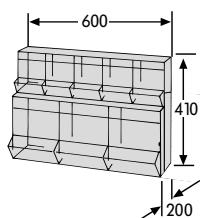


201.1640.0 Injektionsmittelspender
 grau, First-in/First-out-system, ohne Kombi-Set,
 zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel erforderlich.

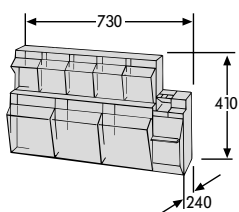


201.1650.0 Injektionsmittelspender
 grau, Entnahme und Bestückung von oben,
 mit Kombi-Set Tupferspender und -Befeuchter,
 zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel erforderlich.

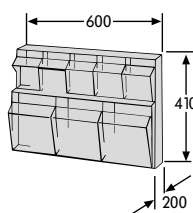

201.1660.0 Injektionsmittelspender
 grau, Entnahme und Bestückung von oben, ohne
 Kombi-Set, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel
 erforderlich.

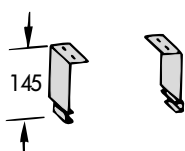

201.1700.0 1 Paar Befestigungswinkel
 für Spender 201.1610.0, 201.1640.0, 201.1650.0
 und 201.1660.0.

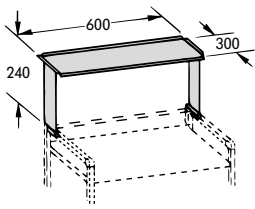

varimed® Zubehör für medi-net Vielzwecktisch


Modell-Nr. Beschreibung

201.1800.0 Konsole
aus CNS 18/10 mit Befestigungswinkeln.

201.1900.0 Befestigungskloben
(o. Abb.) 10 mm Ø


201.1910.0 Befestigungskloben
(o. Abb.) 16 mm Ø

201.1920.0 Befestigungskloben
(o. Abb.) 18 mm Ø

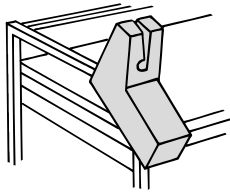

Modell-Nr. Beschreibung


201.2600.0 Ampullenöffner
Cupfix

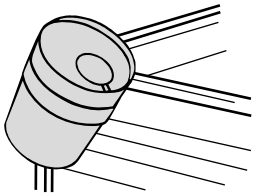

201.2700.0 Medi-Müll-Set
1,5 Ltr., 20 Boxen aus Polypropylen mit rotem Deckel,
mit Halterung.

201.2710.0 Medi-Müll-Boxen
(o. Abb.) 1,5 Ltr., Karton mit 100 Boxen, ohne Halterung.

201.2720.0 Halterung
(o. Abb.) Ausführung wie 201.2700.0, jedoch ohne Boxen.
(Halterungen für andere Systeme auf Anfrage)

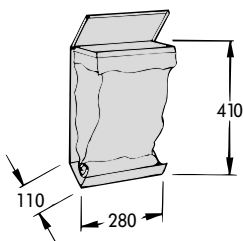

201.2800.0 Abfallsammler
mit Beutel in Rollenform, Gestell grauweiß
pulverbeschichtet.

201.2850.0 Ersatzbeutel
(o. Abb.) in Rollenform für 201.2800.0.

varimed®

Modell- und Materialbeschreibungen

Liegen

Stahlrohrrahmen 40 × 20 mm, Fußpaare 30 × 30 mm, pulverbeschichtet oder verchromt. Mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Kopfteil mit 2 Verstellrasten komplett aus Metall.

medi-net

Gestell aus Stahlrohr 20 × 20 mm, pulverbeschichtet

Rollen

Alle Rollen sind kontaktverfärbungs- und abriebfrei.

Schubladen

Schubladen werden in kugelgelagerten Präzisionsschienen geführt.

Bügelgriffe

Ergonomisch geformter Griff, Lochabstand 192 mm. Die Oberfläche ist beständig gegen Chemikalien und durch seine gerundete Form leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Lackierung

Hochwertige Polyester-Pulverbeschichtung, hochglänzende Oberfläche, mit extremer Stoß- und Kratzfestigkeit, leicht zu reinigen, desinfektionsfest und klimabeständig.

Serienmäßige Beschichtung der Gestelle,

pulverbeschichtet grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006, graualuminium RAL 9007 oder verchromt. Bitte die Ausführungsbeschreibung der Modelle beachten.

Liegen, medi-net- und Hocker-Gestelle

gegen Aufpreis auch farbig nach Farbpalette lieferbar.

Weitere Sonderbeschichtungen

nach RAL auf Anfrage.

Polsterung

Schaumstoff auf Trägerplatte, mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstleder-Bezug in zwei Qualitäten, nahtlos verklebt. Liegenpolster mit Abstandshalter zum Rahmen.

Ausführung comfort (gegen Aufpreis lieferbar): 15 Farbtöne

Strapazierfähiges Material mit hoher Elastizität und Biegsamkeit für außerordentlich hohen Sitz- und Liegekomfort. Genarbte Oberfläche. Die Aufpreise 200.8500.0 / 200.8510.0 / 200.8520.0 / 200.8530.0 / 200.8540.0 / 200.8550.0 / 200.8560.0 wurden in den ausgewiesenen Preisen für die jeweiligen comfort-Ausführungen bereits berücksichtigt.

Ausführung classic (ohne Aufpreis lieferbar): 4 Farbtöne

Strapazierfähiges, elastisches Material. Glatte Oberfläche.

Wir empfehlen:**Zubehör für die Polsterreinigung**

Modell-Nr.	Beschreibung
2019878 (o. Abb.)	Spezialreiniger für Kunstleder Sprühflasche mit 500 ml Inhalt (Verpackungseinheit 3 Flaschen)
2026973 (o. Abb.)	Reinigungsset Polster eine Sprühflasche mit 500 ml Inhalt und eine Bürste

Detaillierte Informationen zur Reinigung und Desinfektion der Polster finden Sie in unseren jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

Kunstleder comfort

goldgelb 86



agavengrün 109



goldorange 106




milchkaffee 102



karminrot 92



sandbeige 101

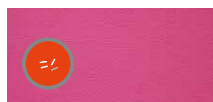


himbeerrot 103



steingrau 96




eisblau 108

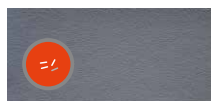

schiefergrau 97



karibikblau 82

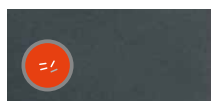


titangrau 91



atlantikblau 83



blütenweiß 84

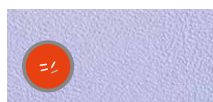

lavendellila 107

Kunstleder classic

weiß 53



silbergrau 55













ozean 52



schwarz 57

Kunststoff

silbergrau

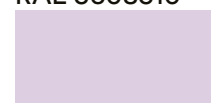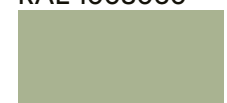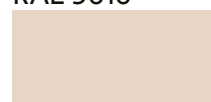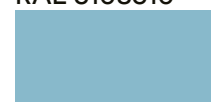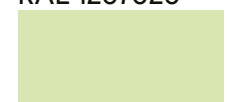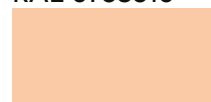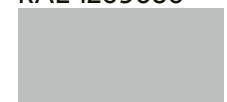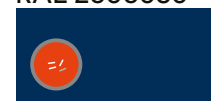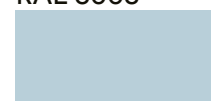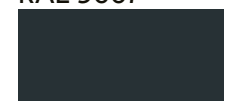Lackierungengrauweiß
RAL 9002lotusrosa
RAL 3608510limonengrün
RAL 1008060reinweiß
RAL 9010tricotfliederweiß
RAL 3108510filigrangrün
RAL 1207020seerosenweiß
RAL 0758510tennisblau
RAL 2307020eiskaltgrün
RAL 1209030safranhellorange
RAL 0608530hellblau
RAL 2606030weißaluminium
RAL 9006signalgelb
RAL 1003saphirblau
RAL 5003graualuminium
RAL 9007blutorange
RAL 2002bleichblau
RAL 2308010anthrazitgrau
RAL 7016

antimikrobiell

Diese Farben haben antimikrobielle Eigenschaften

Polster- und Lackierungsfarben

Entdecken Sie neue Farbwelten

Mit insgesamt 19 Polster- und 18 Lackierungsfarben haben Sie viele Möglichkeiten, in Ihren Räumen Farbakzente zu setzen.

Ob gedeckt oder fröhlich, klassisch oder modern, elegant oder extravagant – bei uns finden Sie garantiert schnell den passenden Farbton.

Wir beraten Sie auch gerne persönlich – sprechen Sie uns an!



Lassen Sie sich inspirieren:
www.schmitz-soehne.com



Kontakt

SCHMITZ u. Söhne
GmbH & Co. KG
Zum Ostefeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

Postfach 14 61
58734 Wickede (Ruhr)

T +49 (0)2377 84 0
F +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-soehne.de

Export:
T +49 (0)2377 84 0
F +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:
T +49 (0)2377 84 550
F +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Informationen zu weiteren
Niederlassungen weltweit
finden Sie auf unserer
Internetseite:

www.schmitz-soehne.com



Alle mit dem CE-MD-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung 2017/745/EU (MDR) sowie dem Medizinprodukteanpassungsgesetz und sind Medizinprodukte der Risikoklasse I.



Alle mit dem einfachen CE-Kennzeichen gekennzeichneten Produkte entsprechen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie der Verordnung über elektrische Betriebsmittel.

Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!



* Dieser Artikel ist Handelsware, welcher unter dem OEM-Namen vertrieben wird.

Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und Niederlassungen. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen sind möglich. Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. Schutzgebühr 3,00 Euro.