

seca 799

Elektronische Säulenwaage mit BMI-Funktion



- Standortunabhängig durch Batteriebetrieb.
- Einfach zu transportieren.
- Rentabel und wartungsarm durch sparsamen Verbrauch.
- Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz.

KS **Medizintechnik**

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN 

www.ksmedizintechnik.de

seca

Präzision für die Gesundheit

seca 799:

Die intelligente Lösung für flexiblen Einsatz

Im medizinischen Bereich eine Notwendigkeit: hohe Präzision und durchdachte Funktionalität müssen mit Wirtschaftlichkeit verbunden sein. Seit über hundert Jahren entwickelt seca innovative Waagen und Längenmesssysteme, die diese Ansprüche optimal erfüllen. Denn nur Arbeitsgeräte, die exakt auf die Bedürfnisse von Ärzten und Pflegepersonal abgestimmt sind und gleichzeitig rentabel arbeiten, bedeuten eine echte Erleichterung in Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen. Die flexibel einsetzbare Säulenwaage seca 799 gehört dazu.




Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz

In Krankenhäusern und Arztpraxen unerlässlich: die Bewertung des Ernährungszustandes des Patienten. Deshalb ist die seca 799 mit einer BMI-Funktion versehen, über die Körpergröße und Gewicht des Patienten in eine aussagekräftige Relation gesetzt werden. Auch die HOLD-Funktion erleichtert die tägliche Arbeit: Sie sorgt dafür, dass das Ergebnis auch nach Entlastung der Waage weiter angezeigt wird. So ist es möglich, erst den Patienten zu versorgen und anschließend das Gewicht zu notieren. Zusatzgewichte, die nicht in das Wiegeergebnis einfließen sollen, werden ganz einfach über die TARA-Funktion ausgeglichen.



Standortunabhängig und einfach zu transportieren.

Die seca 799 kann genau dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht wird. Die Stromversorgung durch Batterien macht sie unabhängig vom Stromnetz. Aber eine flexibel nutzbare Waage muss auch bequem zu bewegen sein – deshalb ist die seca 799 mit leichtgängigen Transportrollen ausgestattet, auf denen sie ganz einfach an ihren Bestimmungsort gefahren werden kann.

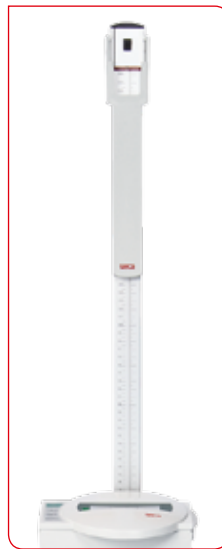

Besonders rentabel und wartungsarm.

Die seca 799 arbeitet äußerst energiesparend und damit hoch rentabel. Der niedrige Verbrauch der wartungsarmen Säulenwaage sorgt dafür, dass sehr viele Wägungen mit einem einzigen Batteriesatz möglich sind. Auch die Abschaltautomatik unterstützt den geringen Energieverbrauch.

seca 799

Technische Daten

- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- Maße (BxHxT): 294 x 831 x 417 mm
- Eigengewicht: 6,3 kg
- Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional
- Funktionen: TARA, HOLD, BMI, Wägebereichsumschaltung, Abschaltautomatik
- Optional: Messstab seca 220 und seca 224, Netzgerät seca 447
- Eichklasse: 