



PUSHING TECHNOLOGY TO EXCELLENCE



Anti.BAC®

Sim.LED 4500

Kleine OP-Leuchte – großes Sichtfeld

KS **Medizintechnik**
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921
HIER GÜNSTIG KAUFEN 
www.ksmedizintechnik.de

Sim.LED 4500 – KLEINE OP-LEUCHTE MIT GROSSER LEISTUNG

Die Sim.LED 4500 ist durch ihr homogenes Licht und die ausgezeichnete Tiefenausleuchtung die ideale Leuchte für Untersuchungen und kleinere ambulante Eingriffe, wie sie in der Intensivpflege oder der plastischen Chirurgie an der Tagesordnung sind. Sie zeichnet sich zudem durch ihre sehr geringe Leistungsaufnahme und exzellente Hygieneeigenschaften aus.

Sim.LED 4500

Zentrale Beleuchtungsstärke in 1 m Abstand [lx]	100.000
Dimmbarkeit von/bis [lx]	25.000 – 100.000
Farbtemperatur [K]	4.500
Leuchtfelddurchmesser d ₁₀ in 1 m Abstand [mm]	170
Farbwiedergabeindex Ra	96
Rotwiedergabeindex R9	96
Ausleuchtungstiefe ohne Nachfokussierung (L1 + L2) bei 60% [mm]	1.560
Ausleuchtungstiefe ohne Nachfokussierung (L1 + L2) bei 20% [mm]	1.610
Gewicht Leuchtenkörper [kg]	3
Stromverbrauch [W]	28
Anzahl LEDs	18
Lebensdauer der LEDs [h]	> 60.000
Konformität	CE

High-End Materialien

- Einsatz von Aluminium und Sicherheitsglas.
- Neueste, einfarbige natürlich weiße LEDs.
- Aluminium-Leuchtenkörper als idealer Kühlkörper.
- Innovative LED-Technologie: patentierter Sim.POD Reflektor für eine einzigartige Lichtqualität und ein homogenes Lichtfeld.
- 5 Jahre Garantie auf den Sim.POD.
- Einzigartiges SIMEON Triangel-Design bietet eine maximale Lichtaustrittsfläche und optimale Tiefenausleuchtung.

Höchste Hygiene


- Innovative antibakterielle Beschichtung.
Anti.BAC®
- Sicherheitsglas für ideale Hygiene.
- Nahtlos geschlossene Bauweise.
- Steril-Handgriff für problemlose Positionierung des Leuchtenkörpers.

Wirtschaftlichkeit

- Sehr lange Lebensdauer
> 60.000 h für die LEDs.
- Einzigartig gute Energieeffizienz, geringe Leistungsaufnahme.
- Optimales Wärmemanagement.


Intensivpflege

Mit der Sim.LED 4500, platziert am Intensivstationsbett, können kleinere Eingriffe direkt vor Ort stattfinden.

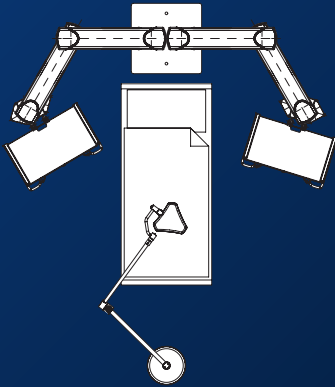

Nutzerfreundlich

Stufenlose Dimmbarkeit für individuelle Lichteinstellungen.

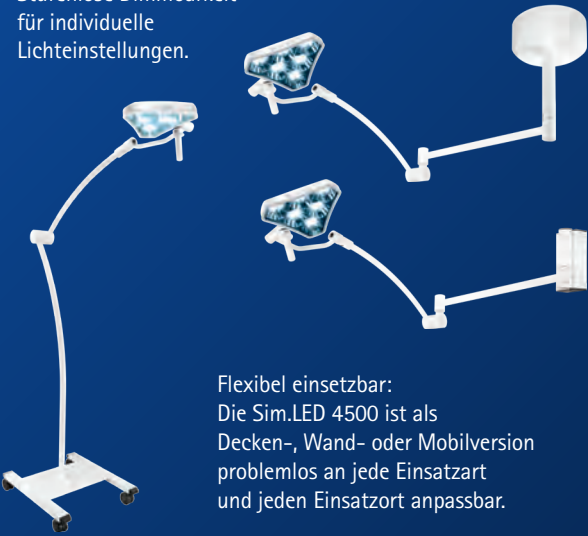


Flexibel einsetzbar: Die Sim.LED 4500 ist als Decken-, Wand- oder Mobilversion problemlos an jede Einsatzart und jeden Einsatzort anpassbar.



Sim.LED 4500 als Mobilversion ist auch mit einzigartigen, komplett kabellosen Batterie Back-up System verfügbar.

Plastische Chirurgie

Sim.LED 4500 – die Idealbesetzung für diese Disziplin. Hier eignet sich die Sim.LED 4500 wahlweise auch in Kombination mit einem Monitor.

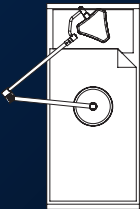

SIMEON MEDICAL IHR LÖSUNGS- ANBIETER FÜR DAS KRANKEN- HAUS



PUSHING TECHNOLOGY TO EXCELLENCE

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 18
78532 Tuttlingen
Telefon: +49 (0) 74 61 / 9 00 68 - 0
Fax: +49 (0) 74 61 / 9 00 68 - 900

www.simeonmedical.com

info@simeonmedical.com



Produkte sind nur in registrierten Ländern erhältlich.

*Sim.CARRY made in Tschechien made in Germany**

Als Lösungsanbieter für das Krankenhaus steht SIMEON Medical für mehr als 20 Jahre Erfahrung, 100 Mitarbeiter an 6 Standorten auf der ganzen Welt sowie grenzenlose Innovationskraft und unzählbares Know-How für medizintechnische Lösungen. Durch die Nähe zu unseren Kunden und unser Verständnis für deren Bedürfnisse garantieren wir Ihnen exzellente Produkte „Made in Germany“*